

2014 / 2015  
**DiaDent Group International**

Passion for Innovation ●●●

## DiaDent's Network

### DiaDent Group International(Korea & International)

No. 626, Yeonje-Ri, Gangoe-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungcheong Buk Do, 363-951, South Korea  
Tel)82-43-266-2315 Fax)82-43-262-8658  
E-mail: diadent@diadent.co.kr

### DiaDent Group International Inc. (Canada & USA)

11-3871 North Fraser Way, Burnaby B.C, Canada V5J 5G6  
Tel)1-604-451-8851 Fax)1-604-451-8865  
E-mail: diadent@diadent.com

### DiaDent Europe B.V (Europe)

Antennestraat 70, 1322 AS Almere, the Netherlands  
Tel)31-36-549-8607 Fax)31-36-536-7317  
E-mail: diadent@diadent europe.com

## Bienvenidos a DiaDent

### Pasión por la innovación!

DiaDent es una de las compañías proveedoras de artículos de endodoncia líder en la industria dental desde 1985. Durante más de 29 años, DiaDent se dedicó a elaborar los mejores productos dentales de alta calidad a través de nuestra pasión por la innovación y lidera el mercado global en la manufactura y provisión de avanzados artículos de endodoncia.

Desde los inicios de la exportación de los puntas de gutapercha(Gutta Percha Points) y de los Puntas de papel(Paper Points), DiaDent creció hasta convertirse en el líder global especializándose en los dispositivos y materiales de endodoncia. Los innovadores y confiables artículos, servicios y procesos de DiaDent están reconocido como la marca mundial y hoy en día DiaDent exporta a más de 900 distribuidores en 117 países de todo el mundo. DiaDent está avanzando en el mundo en diferentes sistemas con las normas más exigentes por lo que DiaDent puede contribuir más efectivamente para crear nuevos mercados y continuar para una aproximación más responsable para los negocios globales. Todos los productos de DiaDent son inspeccionados por un estricto sistema de gestión de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001 & ISO 13485.

Para ser siempre mejor e innovador, DiaDent se esfuerza al máximo en fortalecer su sección de D&I para desarrollar nuevos dispositivos y artículos dentales. Nuestros productos provenientes del departamento de D&I de DiaDent nos coloca en el mercado global de manufactura dental de alta tecnología. A través de los productos y servicios innovadores y confiables y un acercamiento responsable a los negocios y la colaboración con nuestros socios y clientes, DiaDent continuará viendo todos los desafíos como una oportunidad y haremos lo mejor de nosotros para estar perfectamente posicionados como uno de los líderes reconocidos del mundo en la industria dental.

Todos los que formamos parte de DiaDent les agradecemos a nuestros clientes y socios de negocios por su apoyo y fidelidad continua. Les deseamos a todos un año feliz y próspero.

Sinceramente,

**DiaDent Group International**

# DiaDent's Network

### DiaDent Group International (Korea & International)

No. 626, Yeonje-Ri, Gangoe-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungcheong Buk Do, 363-951, South Korea  
Tel) 82-43-266-2315 Fax)82-43-262-8658  
E-mail: diadent@diadent.co.kr

### DiaDent Group International Inc. (Canada & USA)

11-3871 North Fraser Way, Burnaby B.C, Canada V5J 5G6  
Tel)1-604-451-8851 Fax)1-604-451-8865  
E-mail: diadent@diadent.com

### DiaDent Europe B.V (Europe)

Antennestraat 70, 1322 AS Almere, the Netherlands  
Tel)31-36-549-8607 Fax)31-36-536-7317  
E-mail: diadent@diadent europe.com





*Los innovadores y confiables artículos, servicios y procesos de DiaDent están reconocido como la marca mundial y hoy en día DiaDent exporta a más de 900 distribuidores en 117 países de todo el mundo.*

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ALBANIA              | MALAYSIA          |
| ARMENIA              | MALTA             |
| ARGENTINA            | MAURITIUS         |
| AUSTRALIA            | MEXICO            |
| AUSTRIA              | MOLDOVA           |
| AZERBAIJAN           | MONGOLIA          |
| BAHRAIN              | MONTENEGRO        |
| BANGLADESH           | MOROCCO           |
| BELARUS              | MYANMAR           |
| BELGIUM              | NETHERLANDS       |
| BOLIVIA              | NEW ZEALAND       |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | NEPAL             |
| BRAZIL               | NIGERIA           |
| BRUNEI               | NORWAY            |
| BULGARIA             | OMAN              |
| CANADA               | PAKISTAN          |
| CAMBODIA             | PALESTINE         |
| COSTA RICA           | PANAMA            |
| CHILE                | PAPUA NEW GUINEA  |
| CHINA                | PARAGUAY          |
| COLOMBIA             | PERU              |
| CROATIA              | PHILIPPINES       |
| CYPRUS               | POLAND            |
| CZECH REPUBLIC       | POLYNESIA         |
| DENMARK              | PORTUGAL          |
| DOMINICAN REPUBLIC   | QATAR             |
| ECUADOR              | REUNION ISLAND    |
| EGYPT                | ROMANIA           |
| EL SALVADOR          | RUSSIA            |
| ESTONIA              | SAUDI ARABIA      |
| FINLAND              | SENEGAL           |
| FRANCE               | SERBIA            |
| GEORGIA              | SINGAPORE         |
| GERMANY              | SLOVENIA          |
| GHANA                | SOUTH AFRICA      |
| GREECE               | SPAIN             |
| GUATEMALA            | SRI LANKA         |
| HONG KONG            | SUDAN             |
| HUNGARY              | SWEDEN            |
| INDIA                | SWITZERLAND       |
| INDONESIA            | SYRIA             |
| IRAN                 | TAIWAN            |
| IRAQ                 | THAILAND          |
| IRELAND              | TRINIDAD & TOBAGO |
| ISRAEL               | TUNISIA           |
| ITALY                | TURKEY            |
| JAMAICA              | UAE               |
| JAPAN                | UGANDA            |
| JORDAN               | UNITED KINGDOM    |
| KAZAKHSTAN           | UKRAINE           |
| KENYA                | U.S.A             |
| KOREA                | URUGUAY           |
| KOSOVO               | UZBEKISTAN        |
| KUWAIT               | VENEZUELA         |
| LATVIA               | VIETNAM           |
| LEBANON              | YEMEN             |
| LIBYA                |                   |
| LIECHTENSTEIN        |                   |
| LITHUANIA            |                   |
| MACEDONIA            |                   |
| MADAGASCAR           |                   |

OBTURACION DEL CANAL RADICULAR

- Puntas de gutapercha con marcación milimétrica
- Puntas puntiagudas especiales de gutapercha
- Puntas de papel con marcación milimétrica
- Puntas puntiagudas especiales de papel
- Materiales de relleno temporarios
- Diapex Plus (Pasta de hidróxido de calcio premezclado con yodoformo)
- Diapaste (Pasta de hidróxido de calcio premezclado con sulfato de bario)
- DiaPen(Dispositivo inalámbrico de compactación vertical en caliente)
- DiaGun(Dispositivo inalámbrico de obturación de relleno)

COSMETICA & RESTAURACION

- Resina compuesta microhíbrida de restauración
- Resina compuesta de restauración en fluido
- Agente adhesivo fotopolimerizable
- Gel de decapado
- Sellador fotopolimerizable de fosas y fisuras
- Compuesto dual de reconstrucción de muñones
- Compuesto autopolimerizable de reconstrucción de muñones
- LED de polimerización inalámbrica
- Cemento dental temporario
- Crema EDTA de preparación del canal radicular

INSTRUMENTO DE ENDODONCIA

- Limas rotatorias de níquel-titanio
- Limas K-flexibles
- Léntulo
- Lima de sonda(Probe File)
- Fresa Gates(Gate Drills)
- Ensanchador Peeso(Peeso Reamers)
- Limas de mano de níquel-titanio
- Limas de mano de acero inoxidable
- Espaciador de acero inoxidable
- Condensadores de acero inoxidable
- Condensador de endodoncia
- Medidor de endodoncia
- Jeringas de irrigación
- Puntas de irrigación endodóntica

MISCELANEOS

- Cajas de almacenamiento endodóntico de aluminio
- Antifaz y anteojos de protección
- Contenedores y bandejas de esterilización
- Cepillos profilácticos
- Copas profilácticas
- Bloques y portadores de fresa
- Bandejas de instrumento
- Arco de alambre de níquel-titanio
- Artículos de vidrio
- Cera dental

OBTURACION DEL CANAL RADICULAR


- Puntas de gutapercha con marcación milimétrica
- Puntas puntiagudas especiales de gutapercha
- Puntas de papel con marcación milimétrica
- Puntas puntiagudas especiales de papel
- Materiales de relleno temporarios
- Diapex Plus (Pasta de hidróxido de calcio premezclado con yodoformo)
- Diapaste (Pasta de hidróxido de calcio premezclado con sulfato de bario)
- DiaPen(Dispositivo inalámbrico de compactación vertical en caliente)
- DiaGun(Dispositivo inalámbrico de obturación de relleno)

## DiaDent Puntas de gutapercha y de papel con marcación


- Todas las puntas de DiaDent son de tipo Hand Jig Rolled para cumplir las normas más rigurosas.
- Son uniformemente afiladas y excelentes en la consistencia del tamaño.
- Todas las puntas son inspeccionadas con láser para asegurar el cumplimiento de las tolerancias más exigentes de las normas ISO.

### Puntas de gutapercha con marcación milimétrica

- Método rápido y fácil para las mediciones profundas.
- Puntas con marcaciones en 16, 18, 19, 20, 22 y 24mm.
- Elimina las perforaciones de la cúspide que pueden continuar en sangramiento.
- Alcanza la cúspide, sella completamente toda la longitud del canal.
- Ahorra el tiempo en el sillón con las puntas premedidas.
- Mediciones más exactas de las profundidades.

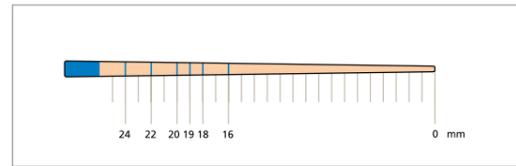

Marcación Milimétrica

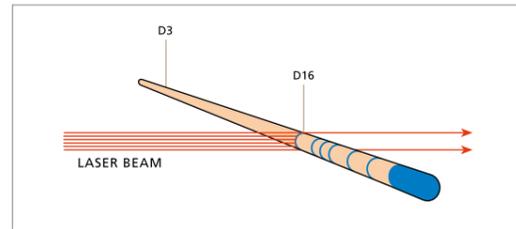


### Sistema Computarizada de Inspección Láser

- Cada punta es inspeccionada por el rayo láser.
- Usando un rayo láser, se inspecciona individualmente el diámetro en la ubicación D3 y D16 de cada punta.
- Las normas ISO y ADA requieren el uso de las unidades de medición de incremento de 1/100mm pero DiaDent usa un incremento de 1/1,000mm.


### Puntas de papel con marcación milimétrica

- Método rápido y fácil para las mediciones profundas.
- Puntas con marcaciones en 18, 19, 20, 22 y 24mm.
- Elimina las perforaciones de la cúspide que pueden continuar en sangramiento.
- Seca completamente toda la longitud del canal.
- Ahorra el tiempo en el sillón con las puntas premedidas.
- Mediciones más exactas de las profundidades.

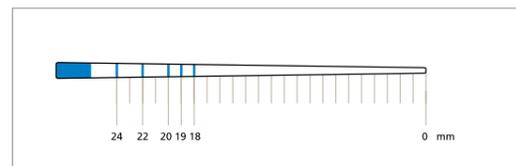

Marcación Milimétrica


#### Garantía de calidad de DiaDent

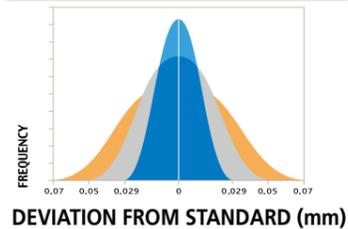

DEVIATION FROM STANDARD (mm)

■ DIAIDENT ML029 SPECS  
■ ISO and ADA SPECS (#10 - #25 sizes)  
■ ISO and ADA SPECS (#30 - #140 sizes)

#### Absorción comparativa de las puntas de papel por marcas

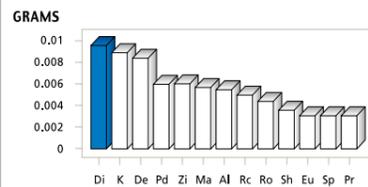

JOSE PUMAROLA-SUNE, JOURNAL OF ENDODONTICS, VOL 24, NO.12, 796-798


#### Patentes de DiaDent

- US Patent No. 6,004,133
- International Patents pending.
- European Patents No. 0964656
- United Kingdom Patents No. 0964656
- Deutsches Patents No. EP 0964656

## Puntas de tipo Hand jig rolled vs Puntas de tipo Machine rolled


- El método hand rolling de DiaDent asegura que las siguientes características a las puntas:

#### Puntas de gutapercha de tipo Hand Jig Rolled de DiaDent

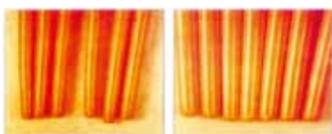

- Punta afilada en forma consistente y uniforme
- Puntas en forma de bala redondeada suavemente
- Toma rápidamente la forma del canal
- Mayor posibilidad del óptimo sellamiento apical

#### Puntas de gutapercha de tipo Machine Rolled

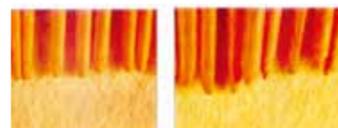

- Punta afilada en forma inconsistente
- Puntas desiguales y con formas impredecibles
- Superposición del material de las puntas
- Posibilidad reducida del óptimo sellamiento apical

## ML.029 PUNTAS DE GUTAPERCHA CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA + INSPECCIONADA CON LÁSER



### ML.029

- M - Millimeter Marked
- L - Laser Inspected
- .029 - Diameter Tolerance

#### Available Sizes

Size	P-63	SP-60
XF	ML 102-601	ML 102-S601
FF	ML 102-602	ML 102-S602
MF	ML 102-603	ML 102-S603
F	ML 102-604	ML 102-S604
FM	ML 102-605	ML 102-S605
M	ML 102-606	ML 102-S606
ML	ML 102-607	ML 102-S607
L	ML 102-608	ML 102-S608
XL	ML 102-609	ML 102-S609
XF/M	ML 102-691	ML 102-S691

(Pkg. of 100)

#### Información del paquete

##### • P43 Paquete de botella

Contiene 6 botellas cuadradas de plástico liviano con tapas de color codificadas  
Dimensiones de la caja:  
77 x 17 x 50mm(W x H x D)

##### • P63 Paquete a prueba de derrame

6 compartimientos con caja externa de papel  
Dimensiones de la caja:  
73 x 17 x 49mm(W x H x D)

##### • SP-60 Paquete deslizante

Tapa que puede ser abierta deslizando con una sola mano  
Dimensiones de la caja:  
70 x 13 x 45mm(W x H x D)

#### Size vs Color Chart

15	45	90	XF	ML
20	50	100	FF	L
25	55	110	MF	XL
30	60	120	F	08
35	70	130	FM	10
40	80	140	M	

(Pkg. of 120)

## PUNTAS DE GUTAPERCHA COFIFICADAS EN COLOR



#### Available Sizes

Size	P-60
XF	102-601
FF	102-602
MF	102-603
F	102-604
FM	102-605
M	102-606
ML	102-607
L	102-608
XL	102-609
XF/M	102-691

(Pkg. of 100)

Size	P-40	P-60
#8	101-401	101-601
#10	101-402	101-602
#15	101-403	101-603
#20	101-404	101-604
#25	101-405	101-605
#30	101-406	101-606
#35	101-407	101-607
#40	101-408	101-608
#45	101-409	101-609
#50	101-410	101-610
#55	101-411	101-611
#60	101-412	101-612
#70	101-413	101-613
#80	101-414	101-614
#90	101-415	101-615
#100	101-416	101-616
#110	101-417	101-617
#120	101-418	101-618
#130	101-419	101-619
#140	101-420	101-620
#15/40	101-491	101-691
#45/80	101-492	101-692
#90/140	101-493	101-693

(Pkg. of 120)

#### Información del paquete

##### • P40 Paquete de botella

Contiene 6 botellas de plástico liviano con tapas de color codificadas  
Dimensiones de la caja:  
79 x 16 x 53mm(W x H x D)

##### • P60 Paquete a prueba de derrame


6 compartimientos paquete  
Dimensiones de la caja:  
71 x 13 x 46mm(W x H x D)

#### Size vs Color Chart

15	45	90	XF	ML
20	50	100	FF	L
25	55	110	MF	XL
30	60	120	F	08
35	70	130	FM	10
40	80	140	M	

**DIA-PROISO.04/.06 PLUS** PUNTAS PUNTIAGUDAS ESPECIALES DE GUTAPERCHA CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA + INSPECCIONADA CON LÁSER

- Puntas puntiagudas especiales de gutapercha
- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Profile, Hero y K3**
- Disponible en puntas .04 & .06

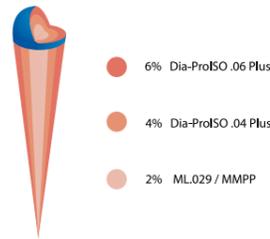

**Available Sizes**

Size	Dia-ProISO .04 Plus		Dia-ProISO .06 Plus	
	P-63	SP-60	P-63	SP-60
#15	ML 158-603	ML 158-S603	ML 159-603	ML 159-S603
#20	ML 158-604	ML 158-S604	ML 159-604	ML 159-S604
#25	ML 158-605	ML 158-S605	ML 159-605	ML 159-S605
#30	ML 158-606	ML 158-S606	ML 159-606	ML 159-S606
#35	ML 158-607	ML 158-S607	ML 159-607	ML 159-S607
#40	ML 158-608	ML 158-S608	ML 159-608	ML 159-S608
#45	ML 158-609	ML 158-S609	ML 159-609	ML 159-S609
#50	ML 158-610	ML 158-S610	ML 159-610	ML 159-S610
#55	ML 158-611	ML 158-S611	ML 159-611	ML 159-S611
#60	ML 158-612	ML 158-S612	ML 159-612	ML 159-S612
#70	ML 158-613	ML 158-S613	ML 159-613	ML 159-S613
#80	ML 158-614	ML 158-S614	ML 159-614	ML 159-S614
#15/40	ML 158-691	ML 158-S691	ML 159-691	ML 159-S691
#45/80	ML 158-692	ML 158-S692	ML 159-692	ML 159-S692

(Pkg. of 60)

**DIA-PROT PLUS**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Protaper**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
#F1	MLP 150-S601
#F2	MLP 150-S602
#F3	MLP 150-S603
#F4	MLP 150-S604
#F5	MLP 150-S605
#F1/F3	MLP 150-S691
#F4/F5	MLP 150-S692
#F1/F5	MLP 150-S693

(Pkg. of 60)

**DIA-PRO R**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas RECIPROC®**
- Puntas con marcación milimétrica

Size	ITEM No.
#25	ML164-605
#40	ML164-608
#50	ML164-610
#Asst(25/40/50)	ML164-691

(Pkg. of 60)

**DIA-PRO W**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Wave One**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
#Small	ML165-601
#Primary	ML165-602
#Large	ML165-603
#Asst(Small/Primary/Large)	ML165-691

(Pkg. of 60)

**DIA-T**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas TF**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
.06 #25	ML163-0605
.06 #30	ML163-0606
.06 #35	ML163-0607
.04 #40	ML163-0408
.06 #25/.04 #40	ML163-1691

(Pkg. of 60)

**FEATHERED TIP**



- Diseñado para ser usado como puntas auxiliares a la técnica de cono maestro
- Taper extra fina
- Tipo Hand Jig Rolled

Size	ITEM No.
#XF	126-601
#FF	126-602
#MF	126-603
#F	126-604
#FM	126-605
#M	126-606
#ML	126-607
#L	126-608
#XF/M	126-691

(Pkg. of 100)

**DIA-GTP**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Profile GT Greater Taper**
- Disponible en puntas .06, .08, .10, .12 taper

Size	ITEM No.
DIA-GTP .06 #20	112-601
DIA-GTP .08 #20	112-602
DIA-GTP .10 #20	112-603
DIA-GTP .12 #20	112-604
DIA-GTP .06/.12 #20	112-691

(Pkg. of 60)

**MMPP**

**PUNTAS DE PAPEL CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA**



**Información del paquete**

- **P33 Paquete en célula**  
Las puntas se mantienen esterilizadas hasta antes de abrirlas  
Dimensiones de la caja:  
78 x 19 x 50mm(W x H x D)

- **P43 Paquete de botella**  
- Contiene 6 botellas cuadradas de plástico liviano con tapas de color codificadas  
Dimensiones de la caja:  
77 x 17 x 50mm(W x H x D)

- **P63 Paquete a prueba de derrame**  
- 6 compartimientos con caja externa de papel  
Dimensiones de la caja:  
73 x 17 x 49mm(W x H x D)

- **SP-60 Paquete deslizante**  
- Tapa que puede ser abierta deslizando con una sola mano  
Dimensiones de la caja:  
70 x 13 x 45mm(W x H x D)

- MMPP está marcada para proveer una guía preliminar en la medición de la profundidad de canal radicular antes del procedimiento clínico con la aplicación de las puntas de gutapercha.
- Estas puntas son altamente absorbentes y están codificadas en color para identificar los tamaños de punta ISO.

**Available Sizes**

Size	P-33	P-63	SP-60	Size	P-33	P-43	P-63	SP-60
XXF	MP 202-301	MP 202-601	MP 202-S601	#8	MP 201-301	MP 201-401	MP 201-601	MP 201-S601
XF	MP 202-302	MP 202-602	MP 202-S602	#10	MP 201-302	MP 201-402	MP 201-602	MP 201-S602
F	MP 202-303	MP 202-603	MP 202-S603	#15	MP 201-303	MP 201-403	MP 201-603	MP 201-S603
M	MP 202-304	MP 202-604	MP 202-S604	#20	MP 201-304	MP 201-404	MP 201-604	MP 201-S604
C	MP 202-305	MP 202-605	MP 202-S605	#25	MP 201-305	MP 201-405	MP 201-605	MP 201-S605
XC	MP 202-306	MP 202-606	MP 202-S606	#30	MP 201-306	MP 201-406	MP 201-606	MP 201-S606
XXF/XC	MP 202-391	MP 202-691	MP 202-S691	#35	MP 201-307	MP 201-407	MP 201-607	MP 201-S607

(Pkg. of 200)

**Size vs Color Chart**

8	10		
15	45	90	XXF
20	50	100	XF
25	55	110	F
30	60	120	M
35	70	130	C
40	80	140	XC

**Contents**

Size	P-33	P-43	P-63	SP-60	Size	P-33	P-43	P-63	SP-60
#08-80	200pcs	200pcs	200pcs	200pcs	#15/40	MP 201-391	MP 201-491	MP 201-691	MP 201-S691
#90-140	200pcs	120pcs	120pcs	120pcs	#45/80	MP 201-392	MP 201-492	MP 201-692	MP 201-S692
					#90/140	MP 201-393	MP 201-493	MP 201-693	MP 201-S693

**PUNTAS DE PAPEL CODIFICADAS EN COLOR**

- Hecho especialmente con papel formulado altamente absorbente
- Codificadas en color
- De tipo Hand Jig Rolled para asegurar una absorbencia superior



**Información del paquete**

- **P40 Paquete de botella**  
- Contiene 6 botellas de plástico liviano con tapas de color codificadas  
Dimensiones de la caja:  
79 x 16 x 53mm(W x H x D)

- **P60 Paquete a prueba de derrame**  
- 6 compartimientos paquete  
Dimensiones de la caja:  
71 x 13 x 50mm(W x H x D)

**Available Sizes**

Size	P-60	Size	P-40	P-60
XXF	202-601	#8	201-401	201-601
XF	202-602	#10	201-402	201-602
F	202-603	#15	201-403	201-603
M	202-604	#20	201-404	201-604
C	202-605	#25	201-405	201-605
XC	202-606	#30	201-406	201-606
XXF/XC	202-691	#35	201-407	201-607

(Pkg. of 200)

**Size vs Color Chart**

8	10		
15	45	90	XXF
20	50	100	XF
25	55	110	F
30	60	120	M
35	70	130	C
40	80	140	XC

**Contents**

Size	P-40	P-60	Size	P-40	P-60
#08-80	200pcs	200pcs	#15/40	201-491	201-691
#90-140	120pcs	120pcs	#45/80	201-492	201-692
			#90/140	201-493	201-693

**DIA-PROISO .04/.06 PLUS PUNTAS PUNTIAGUDAS ESPECIALES DE PAPEL CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA**

- Puntas puntiagudas especiales de papel absorbente con marcación milimétrica
- Diseñado para ser usadas en el secado y en la limpieza de los canales preparados con **limas Profile, Hero y K3**
- Disponible en puntas .04 & .06

**Available Sizes**

Size	Dia-Proiso .04 Plus		Dia-Proiso .06 Plus	
	P-63	SP-60	P-63	SP-60
#15	MP 258-603	MP 258-S603	MP 259-603	MP 259-S603
#20	MP 258-604	MP 258-S604	MP 259-604	MP 259-S604
#25	MP 258-605	MP 258-S605	MP 259-605	MP 259-S605
#30	MP 258-606	MP 258-S606	MP 259-606	MP 259-S606
#35	MP 258-607	MP 258-S607	MP 259-607	MP 259-S607
#40	MP 258-608	MP 258-S608	MP 259-608	MP 259-S608
#45	MP 258-609	MP 258-S609	MP 259-609	MP 259-S609
#50	MP 258-610	MP 258-S610	MP 259-610	MP 259-S610
#55	MP 258-611	MP 258-S611	MP 259-611	MP 259-S611
#60	MP 258-612	MP 258-S612	MP 259-612	MP 259-S612
#70	MP 258-613	MP 258-S613	MP 259-613	MP 259-S613
#80	MP 258-614	MP 258-S614	MP 259-614	MP 259-S614
#15/40	MP 258-691	MP 258-S691	MP 259-691	MP 259-S691
#45/80	MP 258-692	MP 258-S692	MP 259-692	MP 259-S692

(Pkg. of 100)



**DIA-PROISO .04/.06 PLUS en célula**



- Las puntas se mantienen esterilizadas hasta antes de abrirlas

Cell pkg	Dia-Proiso .04 Plus	Dia-Proiso .06 Plus
#15	MP 258-703	MP 259-703
#20	MP 258-704	MP 259-704
#25	MP 258-705	MP 259-705
#30	MP 258-706	MP 259-706
#35	MP 258-707	MP 259-707
#40	MP 258-708	MP 259-708
#15/40	MP 258-791	MP 259-791

(Pkg. of 120)

**DIA-PROT**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Protaper**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
#F1	MP250-S601
#F2	MP250-S602
#F3	MP250-S603
#F4	MP250-S604
#F5	MP250-S605
#F1/F3	MP 250-S691
#F4/F5	MP 250-S692
#F1/F5	MP 250-S693

(Pkg. of 100)

**DIA-PRO R**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas RECIPROC®**
- Puntas con marcación milimétrica

Size	ITEM No.
#25	MP264-605
#40	MP264-608
#50	MP264-610
#Asst(25/40/50)	MP264-691

(Pkg. of 100)

**DIA-PRO W**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Wave One**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
#Small	MP265-601
#Primary	MP265-602
#Large	MP265-603
#Asst(Small/Primary/Large)	MP265-691

(Pkg. of 100)

**DIA-T**



- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas TF**
- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size	ITEM No.
.06 #25	MP263-0605
.06 #30	MP263-0606
.06 #35	MP263-0607
.04 #40	MP263-0408
.06 #25/.04 #40	MP263-1691

(Pkg. of 100)

**FEATHERED TIP**



- Diseñado para ser usado como puntas auxiliares a la técnica de cono maestro
- Taper extra fina
- Tipo Hand Jig Rolled

Size	ITEM No.
#XXF	204-601
#XF	204-602
#F	204-603
#M	204-604
#C	204-605
#XC	204-606
#XXF/XC	204-691

(Pkg. of 200)

**ORGANIZADOR DE ENDODONCIA**

- Organizador de endodoncia empaquetado en plástico con 12 compartimientos.
- La mejor manera para organizar las puntas endodónticas.
- Los organizadores de endodoncia de DiaDent pueden ser ordenados vacíos o combinados con las puntas gutapercha y puntas de papel.



mmGP1



mmPP2



mmCOMBI1

**ML.029 & MMPP**

- Puntas de gutapercha, Puntas de papel con marcación milimétrica.
- Hand Jig Rolled de DiaDent.

Size	Description	ITEM No.
mmEG1	Empty box	EMG 301-100
mmGP1	240points per box(size15/40)	EMG 301-101
mmGP2	240points per box(size45/80)	EMG 301-102
mmGP3	240points per box(size15/80)	EMG 301-103
mmPP1	400points per box(size15/40)	EMP 301-201
mmPP2	400points per box(size45/80)	EMP 301-202
mmPP3	400points per box(size15/80)	EMP 301-203
mmCOMBI1	GP 120points/PP 200points per box(size15/40)	EMC 301-301
mmCOMBI2	GP 120points/PP 200points per box(size45/80)	EMC 301-302
mmCOMBI3	GP 240points/PP 400points per box(size15/40)	EMC 301-303
mmCOMBI4	GP 240points/PP 400points per box(size45/80)	EMC 301-304

**.04 & .06 Tapered ML.029 & MMPP**

- Puntas puntiagudas especiales de gutapercha, papel.
- Diseñado para ser usado como complemento de las **limas Profile, Hero y K3**.

Size	Description	ITEM No.
mmGP 1(4%)	240points GP DIA-PROISO-.04 PLUS(size 15/80)	MSG 301-101
mmGP 2(6%)	240points GP DIA-PROISO-.06 PLUS(size 15/80)	MSG 301-102
mmGP 3(4% & 6%)	240points GP DIA-PROISO-.04 & .06 PLUS (size 15/40)	MSG 301-103
mmPP 1(4%)	240points PP DIA-PROISO-.04 PLUS(size 15/80)	MSP 301-201
mmPP 2(6%)	240points PP DIA-PROISO-.06 PLUS(size 15/80)	MSP 301-202
mmPP 3(4% & 6%)	240points PP DIA-PROISO-.04 & .06 PLUS (size 15/40)	MSP 301-203
mmCOMBI 1 (4%)	240points GP & PP DIA-PROISO-.04 PLUS(size15/40)	MSC 301-301
mmCOMBI 2 (6%)	240points GP & PP DIA-PROISO-.06 PLUS(size15/40)	MSC 301-302



mmGP2(6%)



mmPP1(4%)



mmCOMBI1(4%)

### DIA-GP GAUGE

• **ITEM #781-001** 

- Diseñado para medir un perfecto cono maestro a partir de cualquier punta de gutapercha.
- Se deja caer dentro del tamaño apical y se corta con un cuchillo.
- Autoclavable.
- Dimensiones: 92 x 3 x 20mm(W x H x D)



### INFORMACIÓN DEL PAQUETE

• **P33 Paquete en célula**

- Las puntas se mantienen esterilizadas hasta antes de abrirlas
- Dimensiones de la caja: 78 x 19 x 50mm(W x H x D)



• **P43 Paquete de botella**

- Contiene 6 botellas cuadradas de plástico liviano con tapas de color codificadas
- Dimensiones de la caja: 77 x 17 x 50mm(W x H x D)



• **P63 Paquete a prueba de derrame**

- 6 compartimientos con caja externa de papel
- Dimensiones de la caja: 73 x 17 x 49mm(W x H x D)



• **SP-60 Paquete deslizante**

- Tapa que puede ser abierta deslizando con una sola mano
- Dimensiones de la caja: 70 x 13 x 45mm(W x H x D)



### TEMPORARY STOPPING



- Para el rellenamiento temporario y herramienta de diagnóstico térmico.
- Una varilla calentada con sensibilidad térmica de identificación.
- Gutapercha de alta calidad.
- Fácil de calendar.
- Disponible en color Blanco.

	Blanco
120g	180-201
250g	180-301

### DIATEMP™ A MATERIAL DE RELLENAMIENTO TEMPORAL VISIBLE Y FOTOPOLIMERIZABLE

Material fotopolimerizable con plata en nano tamaño para la restauración temporal/intermedia incrustada o superpuesta y para la realineación de coronas y puentes prefabricadas.




#### Beneficios

- Remoción rápida y simple: Puede ser removido en una pieza
- Alta resistencia al desgaste, resistencia mecánica
- Asegura una rápida preparación
- Excelente adhesión
- Fácil aplicación: Una jeringa conveniente coloca los materiales que no necesitan ser mezclados
- Azul Dia-Temp es ideal para los dientes posteriores
- Amarillo Dia-Temp es ideal para los dientes anteriores

#### Paquetes

- 3 jeringas de 3g
- ITEM#2003-1101 Azul
- ITEM#2003-1201 Amarillo

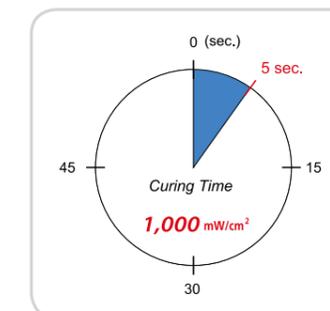

**E-TEMP MATERIAL HIDRÁULICO DE RESTAURACIÓN TEMPORARIA**

- Material de relleno temporario para cavidades estándares y tratamiento posendodóticos.



**Beneficios**


- Material de relleno temporario para las cavidades estándares.
- Fácil preparación con la saliva.
- Excelente adaptabilidad.
- Fácil de remover.
- Se adhiere a la dentina, se expande suavemente durante la preparación y se endurece rápidamente para asegurar un sellado hermético.
- Mejora las propiedades mecánicas para el rápido relleno temporario.

**Forma de uso**


- Prepare y seque la cavidad con una pequeña bolita de algodón.
- Transfiera E-TEMP a la cavidad usando un instrumento adecuado y forma el contorno. En el caso de la clase I oclusal, el paciente debe morder la superficie y luego formar el contorno.
- Después de que el paciente cierra la boca, E-TEMP se endurecerá en 25 minutos. Se recomienda que el paciente evite una presión fuerte o una abrasión durante al menos 2 horas.

**Paquetes**

- 30g ITEM#2004-1001

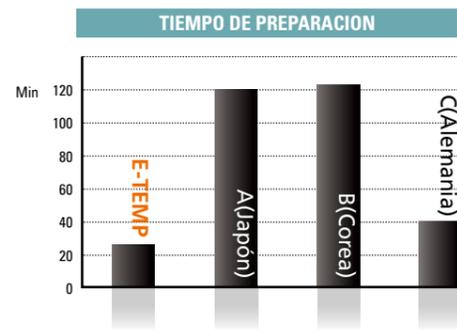



- Esta prueba se mide en la mismo condición a 37 grados y a 95% de humedad en el laboratorio. (D&I DiaDent 2013)

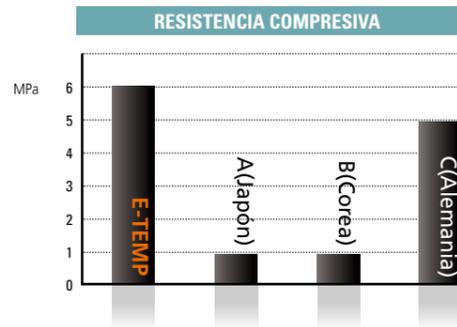

- Esta prueba se mide luego del mismo tiempo de preparación en el laboratorio de acuerdo a la regulación ISO 3107(D&I DiaDent 2013).

**DIAPEX® PLUS PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON YODOFORMO**

- Pasta de hidróxido de calcio premezclado + yodoformo para el tratamiento del canal radicular
- Material de relleno temporario del canal radicular luego de la pulpectomía.
- Ideal para el tratamiento del canal radicular infectado y para la pulpotomía vital en el diente temporario

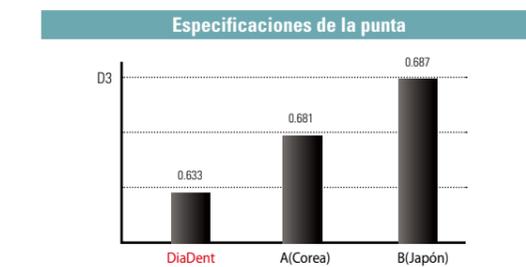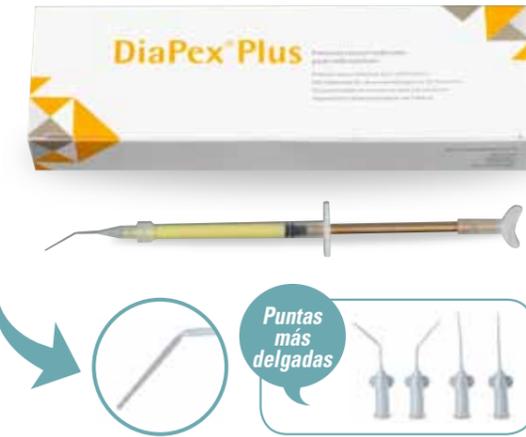

**Indicaciones**

- Medicamento intracanal
- Apexificación
- Control de exudación
- Lesión periapical
- Resorción de raíz
- Rellenamiento temporario de raíz
- Perforaciones
- Diente sin pulpa en desarrollo

**Beneficios**

- Calma el "Absceso agudo"
- Desinfecta el canal
- Promueve la apexificación
- Cura las lesiones traumáticas
- Radiopaco
- Aplicación rápida y simple
- Antibacterial y bacteriostático

**Paquetes**

- **ITEM#1001-501 Conjunto Regular Type A**  
- 2g de pasta y 20 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-502 Conjunto Regular Type B**  
- 2g de pasta y 10 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-503 Conjunto Regular Type C**  
- 2g de pasta y 4 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-504 Conjunto de Rellenamiento**  
- 2g de pasta
- **ITEM#1001-505 Conjunto Introductorio**  
- 0.5g de pasta y 4 puntas desechables
- **ITEM#1001-316 Puntas desechables**  
- 20 puntas desechables en un paquete de ampolla

- Este artículo no están disponibles en Europa

**DIAPASTE™ PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON SULFATO DE BARIO**



**Características**

- Pasta de hidróxido de calcio premezclado + sulfato de bario para el tratamiento del canal radicular.
- Rellenamiento temporario de la raíz.
- Rellenamiento del canal radicular para diente primario.
- Se usa después del tratamiento de extirpación de pulpa
- Material de relleno para la pulpotomía.
- Nivelación temporaria de la pulpa.

**Beneficios**

- Hidrosoluble: Fácil de limpiar y de remover reduciendo el tiempo operativo
- Acceso fácil y rápido
- Radiopaco
- Antibacterial

**Paquetes**

- **ITEM#1001-401 Conjunto Regular Type A**  
- 2g de pasta y 20 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-402 Conjunto Regular Type B**  
- 2g de pasta y 10 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-403 Conjunto Regular Type C**  
- 2g de pasta y 4 puntas desechables con tapa
- **ITEM#1001-404 Conjunto de Rellenamiento**  
- 2g de pasta
- **ITEM#1001-405 Conjunto Introductorio**  
- 0.5g de pasta y 4 puntas desechables
- **ITEM#1001-315 Blue Puntas desechables**  
- 20 puntas desechables en un paquete de ampolla

## DIAPEN | DISPOSITIVO INALAMBRICO DE COMPACTACION VERTICAL EN CALIENTE

- Dispositivo inalámbrico de compactación vertical en caliente de DiaDent.
- DiaPen tiene una óptima funcionalidad y calidad siendo completamente efectivo para el sistema de obturación down-pack.
- DiaPen posee las siguientes técnicas y características:

### Técnicas:

- **Ablandamiento** del material de relleno del canal radicular(puntas de gutapercha) durante el tratamiento del canal radicular
- **Expansión** del material de relleno del canal radicular(puntas de gutapercha) lateral y verticalmente
- **Corte** del material de relleno del canal radicular(puntas de gutapercha)
- **Compactación** del material de relleno del canal radicular(puntas de gutapercha) usando el calor

### Características:

- Excelente resultado con la compactación en caliente y vertical para todos los canales incluyendo los canales laterales. DiaPen ofrece resultados confiables con canales radiculares herméticamente sellados.
- El diseño inalámbrico, ergonómico y liviano hace que sea fácil de portar, limpiar y almacenar.
- Las puntas de rápido calentamiento alcanzan el nivel más alto de temperatura en un(1) segundo ahorrando el tiempo de tratamiento.
- Las puntas codificadas en color están disponibles en varios tamaños(#XF, F, FM, M, ML) para una fácil identificación.
- Tres configuraciones de temperatura(Alta, Media, Baja).
- Operación simple

### Paquetes


#### • ITEM #4002-1001 Conjunto Regular

- Pieza de mano y cargador DiaPen
- Accesorios: Cubierta de silicona(2ea), Adaptador y cable corriente, Pen tip #F (incluyendo Endo stops, 1ea), #FM(incluyendo Endo Stops, 1ea)

### Accesorios

- ITEM #4002-1010 Pieza de manoe
- ITEM #4002-1020 Cargador
- ITEM #4002-1030 Adaptador y cable corriente
- ITEM #4002-1040 Cubierta de silicona(2ea)
- ITEM #4002-1050 Batería
- ITEM #4002-1060 Pen Tip #XF(1ea)
- ITEM #4002-1061 Pen Tip #F(1ea)
- ITEM #4002-1062 Pen Tip #FM(1ea)
- ITEM #4002-1063 Pen Tip #M(1ea)
- ITEM #4002-1064 Pen Tip #ML(1ea)
- ITEM #4002-1065 Pen Tips #F/FM(1ea c/u)

Las puntas codificadas en color: #XF, F, FM, M, ML

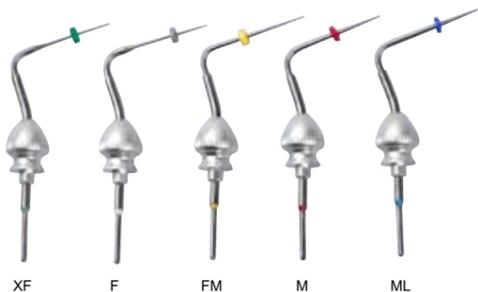

## DIAGUN | DISPOSITIVO INALAMBRICO DE OBTURACION DE RELLENO

- DiaGun es un dispositivo inalámbrico del sistema de obturación que ofrece una rápida y fácil obturación. Con este efectivo sistema y técnica de obturación logrará llegar a óptimos resultados. Las características de este dispositivo de alto rendimiento DiaGun son las siguientes:

### Características

- El diseño inalámbrico y compacto permite una completa libertad de movimiento.
- Rellenamiento de gutapercha hasta el nivel deseado sin demoras.
- El rápido y continuo flujo del material de relleno sella herméticamente el canal.
- Diversas configuraciones de temperaturas(160°C, 180°C, 200°C): Control preciso del flujo de obturación.
- Sistema de calentamiento rápido: Se alcanza la temperatura de 200 grados dentro de los 25 segundos.
- La aguja giratoria a 360 grados diseñada ergonómicamente ofrece una accesibilidad mejorada.
- La aguja más fina puede llenar más fácilmente el canal radicular más angosto.

### Paquetes

#### • ITEM#4001-1001 Conjunto Regular

- Pieza de mano y cargador de DiaGun
- Accesorios: Cubierta de seguridad(2ea), Embolo, O-ring de émbolo(4ea), Adaptador y cable corriente, Puntas desechables de pistola(23G, 4ea), Llave inglesa multipropósito, Cepillo de cerdas, Batería, Obturador de gutapercha(100ea)

### Accesorios

- ITEM #4001-1010 Pieza de manoe
- ITEM #4001-1020 Cargador
- ITEM #4001-1030 Cubierta de seguridad(2ea)
- ITEM #4001-1040 Embolo
- ITEM #4001-1050 O-ring de émbolo(4ea)
- ITEM #4001-1060 Adaptador y cable corriente
- ITEM #4001-1070 Puntas desechables de pistola(23G, 4ea)
- ITEM #4001-1071 Puntas desechables de pistola(25G, 4ea)
- ITEM #4001-1080 Llave inglesa multipropósito
- ITEM #4001-1090 Cepillo de cerdas
- ITEM #4001-1100 Batería
- ITEM #181-101 Obturador de gutapercha(Tipo Medio,100ea)



## GUTTA PERCHA OBTURATOR

- ITEM#181-100 TIPO BLANDO
- ITEM#181-101 TIPO MEDIO
- ITEM#181-102 TIPO DURO

- Diseñado para usar con la pistola de obturación DiaGun.
- Gutapercha especialmente formulado con excelentes características de flujo.
- Fácil de calendar.
- Paquete de 100 unidades.



## OBTURACION DEL CANAL RADICULAR SECUENCIA DE TÉCNICO

### OBTURACION DOWN-PACK CON DIAPEN

**Paso 1a**

Dé la forma del canal radicular con las limas endodónticas y verifique la longitud a trabajar. Seleccione el cono maestro de gutapercha para ser llenado en el canal.

**Paso 1b**

Inserte el pen tip dentro del canal radicular a 4-7mm más corto que la longitud a trabajar y ajuste el Endo Stop en el pen tip.

**Paso 2**

Llene el cono maestro de gutapercha que esté metido en el sellador.

**Paso 3a**

Coloque el pen tip en el orificio del canal radicular y active el dispositivo presionando el botón de operación. Usando el pen tip activado, corte la mitad del cono de gutapercha y coloque moléndolo (downpack) a 6-9mm del ápice aproximadamente 1.5-2 segundos solamente.

**Paso 3b**

Desactive el botón de operación para permitir que el pen tip comience a enfriarse, y al mismo tiempo continúe empujando y manteniendo el pen tip enfriado en el ápice durante 8 segundos para llenar el canal completamente. Active el pen tip otra vez presionando y manteniendo el botón de operación aproximadamente 1-1.5 segundos, compacte el cono de gutapercha a 4-7mm de la longitud a trabajar.

**Paso 4**

Condense el material remanente usando el plugger manual.

## OBTURACION DEL CANAL RADICULAR SECUENCIA DE TÉCNICO

### RELLENE LA OBTURACION CON DIAGUN

**Paso 5**

Usando la punta de DiaGun, haga contacto con la parte superior del cono maestro relleno en el canal y transfiera el calor durante 3 a 5 segundos.

**Paso 6a**

Deje fluir el obturador de gutapercha derretido al canal radicular.

**Paso 6b**

Continúe fluyendo mientras retira la aguja del canal.

**Paso 7**

Use un plugger manual para compactar el material de obturación.

### RADIOGRAFIAS



Mejore y selle los canales radiculares luego de la técnica de obturación del canal radicular en calor con DiaPen & DiaGun.

# COSMETICA & RESTAURACION

- Resina compuesta microhíbrida de restauración
- Resina compuesta de restauración en fluido
- Agente adhesivo fotopolimerizable
- Gel de decapado
- Sellador fotopolimerizable de fosas y fisuras
- Compuesto dual de reconstrucción de muñones
- Compuesto autopolimerizable de reconstrucción de muñones
- LED de polimerización inalámbrica
- Cemento dental temporario
- Crema EDTA de preparación del canal radicular

## DIAFIL™ A RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE RESTAURACIÓN ESTÉTICA

- Resina compuesta microhíbrida fotopolimerizable de restauración estética



Conjunto de inicio



Paquete de rellenamiento



Tipo de cápsula

### Beneficios

- Los aplicadores únicos ofrece una mínima pérdida de polimerización que ayudan a reducir el estrés y la sensibilidad potencia a los dientes.
- Posee una excelente resistencia a la fractura, a la tensión y a la compresión que se mantienen durante un largo tiempo.
- Muy fácil manejo de viscosidad aceptable y buena adaptación marginal.
- Remarcable estabilidad del color y calidad superior de estética.
- Alto nivel de radiopacidad.

### Paquetes

#### • Conjunto de inicio

- 5 jeringas de resina compuesta(4g)
- 1 botella de agente adhesivo(5ml)
- 1 jeringa de gel de decapado(3ml)
- Accesorios: 50 puntas de cepillo, 1 mango de cebillo, recipiente de mezcla, bloque de mezcla, 10 puntas desechables de aguja, lámina de matiz

Set	Matices de la resina compuesta	Nº del artículo
SET A DEL CONJUNTO DE INICIO	A1, A2, A3, A3.5, B2	2001-1101
SET B DEL CONJUNTO DE INICIO	A2, A3, A3.5, B2, B3	2001-1102
SET C DEL CONJUNTO DE INICIO	A1, A2, A3, A3.5, C2	2001-1103

#### • Paquete de rellenamiento

- 1 jeringa x 4g

A1	2001-1201	B2	2001-1207
A2	2001-1202	B3	2001-1208
A3	2001-1203	C2	2001-1210
A3.5	2001-1204	C3	2001-1211
A4	2001-1205	A20	2001-1212
B1	2001-1206	A30	2001-1213



#### • Tipo de cápsula

- 0.25g x 20 cápsulas



A1	2001-1405
A2	2001-1401
A3	2001-1402
A3.5	2001-1403
B2	2001-1404

## PROPIEDADES FISICAS


### Resistente a la flexión

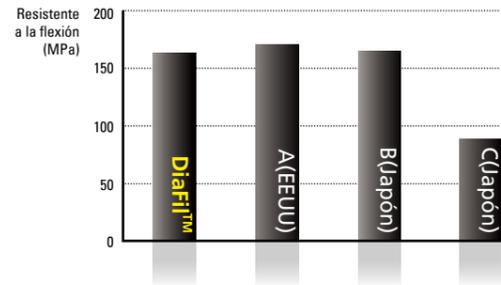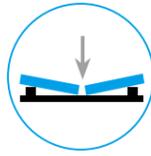


### Resistente a la compresión

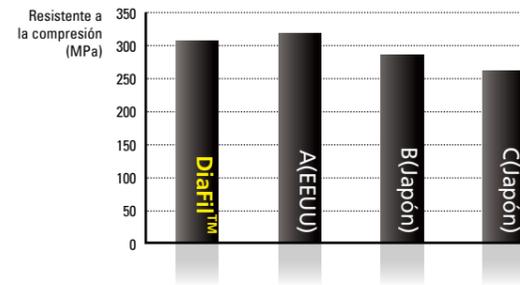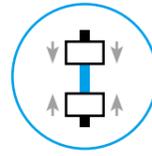

### Profundidad de curación

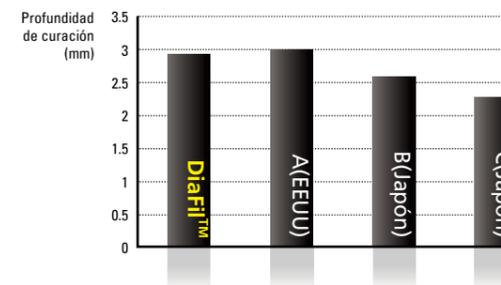

### Resistente a la abrasión y al desgaste

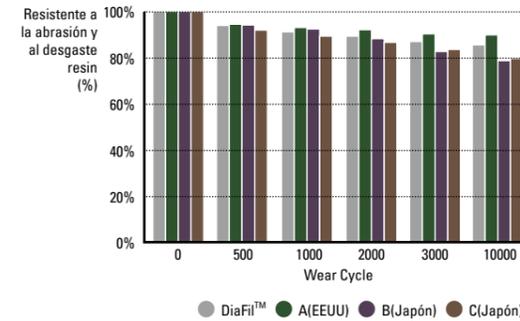


#### ● RESTAURACION POSTERIOR




#### ● RESTAURACION ANTERIOR




#### ● ALTA RADIOPACIDAD

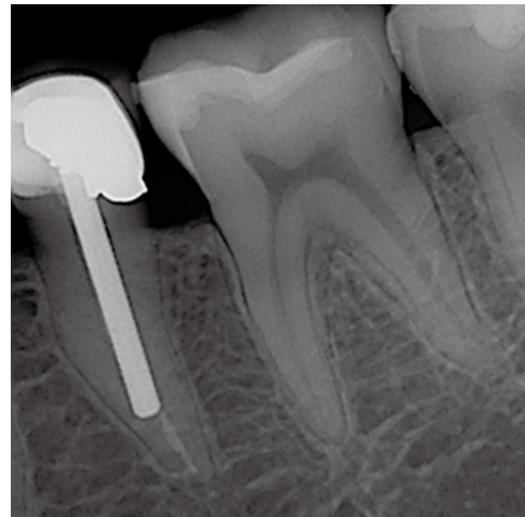


## GUIAS DE TECNICA

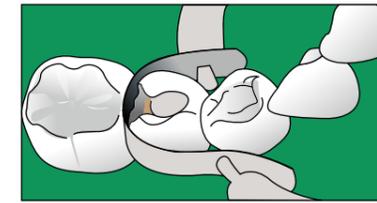


1. Prepare los dientes: Aisle los dientes con un dique de goma y limpie los dientes.

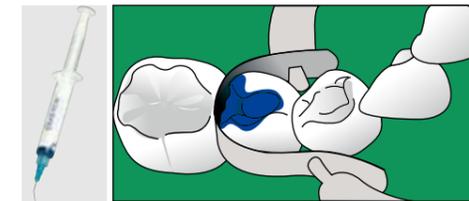


2. Decapado: Aplique DiaEtch(material de decapado) al enamel y a la dentina y espere 15 segundos. Enjuague y seque el agua excedente manteniendo los dientes con humedad.

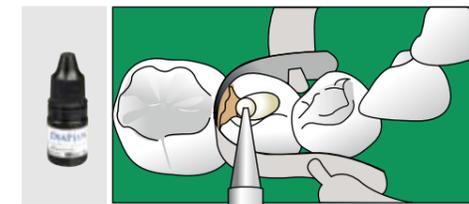


3. Adhesión: Aplique 3 capas consecutivas de DiaPlus(bonding agent) al enamel y a la dentina y espere 15 segundos. Seque bien durante 3 segundos y realice la fotopolimerización durante 20 segundos.

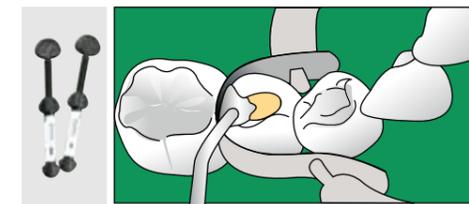

4. Pieza de la resina compuesta: Coloque la DIAFIL™(resina compuesta) en capas inferiores a 2.0mm.

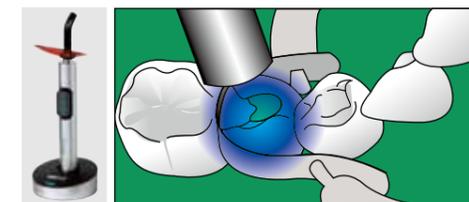

5. Fotopolimerización: Realice la fotopolimerización a cada incremento durante 20 segundos.

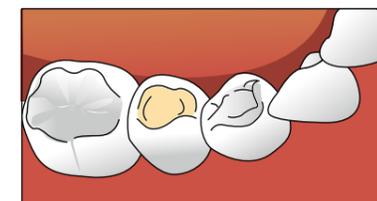

6. Finalización y pulido.

**DIAFIL™ FLOW** RESINA COMPUESTA DE RESTAURACIÓN EN FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE

Compuesto en fluido con manejo muy fácil y alta resistencia




**Beneficios**

- Tiene un alto nivel de liberación de fluorido sin hundimiento ni corrimiento que ayuda a una rápida técnica y manejo.
- Disponible para ser usado en diversos procedimientos de restauración.
  - : Restauraciones directas de clases III, V y IV direct restorations
  - Revestimiento para la clase I y II
  - Sellante de fosas y fisuras en caso de ser necesario.
  - Muy adecuado para tratamientos odontológicos mínimamente invasivos.
- Excelente resistencia a la tensión y bajo encogimiento.
- Materiales de alta radiopacidad.

**Paquetes**

- **Paquete económico**
  - Resina en fluido 2g x 4 jeringas (Matices disponibles A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A20, A30)
  - 40 puntas desechables(negro)
  - Tabla de matiz
- **Paquete de relleno**
  - Resina en fluido 2g x 1 jeringa (Matices disponibles A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A20, A30)
  - 10 puntas desechables(negro)



SHADE	Paquete económico	Paquete de relleno
A1	2001-4101	2001-4201
A2	2001-4102	2001-4202
A3	2001-4103	2001-4203
A3.5	2001-4104	2001-4204
B2	2001-4105	2001-4205
B3	2001-4106	2001-4206
C2	2001-4107	2001-4207
A20	2001-4108	2001-4208
A30	2001-4109	2001-4209

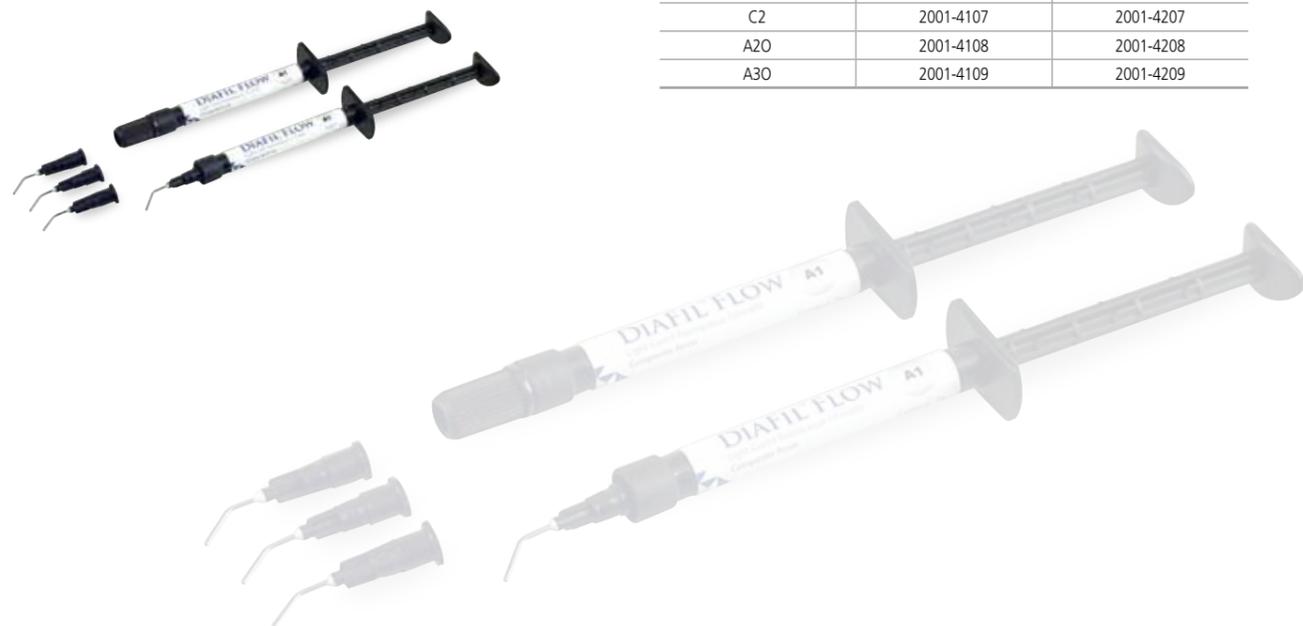

**PROPIEDADES FISICAS**



**Resistencia a la flexión**

La resistencia a la flexión es medida a través de un material de tipo varilla. La resistencia a la flexión es el valor obtenido cuando la muestra se rompe fijada en ambos extremos de la muestra y presionando la mitad de él. Esta prueba combina las fuerzas en base a la compresión y a la tensión. El flujo de DIAFIL™ FLOW se presenta estáticamente más alto que otras 2 marcas.

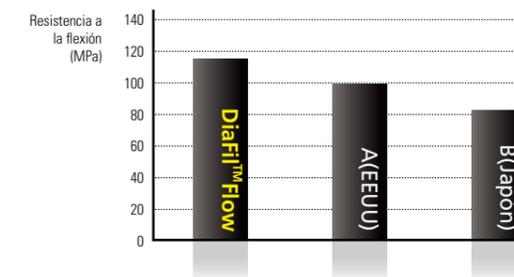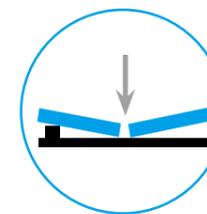



**Resistencia a la compresión**

La resistencia a la compresión es particularmente importante porque ésta está relacionado con la fuerza de masticación. Las varillas están hechas del material y las fuerzas simultáneas son aplicadas a los extremos opuestos de la muestra en longitud vertical. La falla de la muestra es un resultado de las fuerzas del corte y de tensión. El flujo de DIAFIL™FLOW se presenta estáticamente más alto que otra marca.

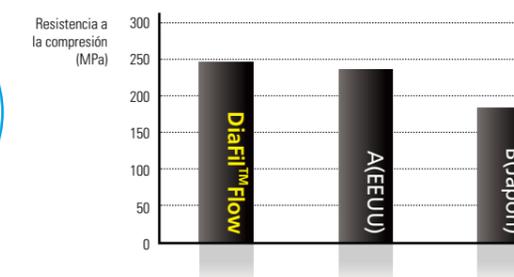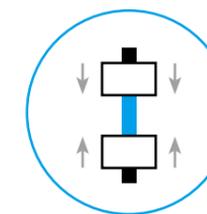

**Flexural Modulus**

Módulo de flexión es un método de definición de la rigidez del material. Un bajo módulo indica el material altamente flexible. El flujo de DIAFIL™FLOW presenta un índice de elasticidad de flexión similar a otras resinas compuestas.

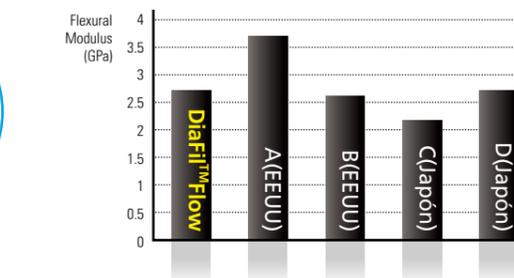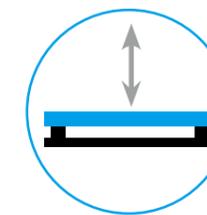

• RESTATURACION CON FLUIDO DIAFIL™ FLOW



**DIAPLUS™** AGENTE ADHESIVO DE COMPONENTE INDIVIDUAL


Recomendado para todas las restauraciones directas de compuesto y procedimientos de adhesión fotopolimerizable.



**Beneficios**

- Alto rendimiento de resistencia de adhesión de dentina y enamel.
- Disponible en todas las clases de restauración directa de compuesto.
- Las restauraciones indirectas de porcelana, amalgama o compuesto después de la fotopolimerización con una película de espesor mínimo.
- El agente adhesivo en base a etanol permite mantener su excepcional resistencia a la adhesión

**RESISTENCIA DE ADHESION AL CIZALLAMIENTO(MPa)**

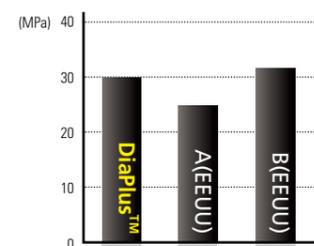

**Paquetes**

- **ITEM#2001-2101**  
- Una botella de agente adhesivo (1 botella x 5ml)

**DISPOSABLE BRUSHES**

- Las puntas adhesivas flexibles permite las restauraciones y tomar, ubicar, llevar y colocar los pequeños objetos de todo tipo rápida y fácilmente.
- Estos cepillos están incluidos en el paquete regular de DiaPlus G7.

Size	ITEM NO.
Pequeño	2001-6301
Mediano	2001-6302
Grande	2001-6303

(Pkg. of 100)



**DIAPLUS™ G7** AGENTE ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPONENTE INDIVIDUAL AUTODECAPADO

DiaPlus™ G7, el agente adhesivo de 7ª generación ofrece resultados superiores y consistentes de adhesión en la dentina y en el enamel con una botella y un sistema de agente adhesivo autodecapado de una capa.



**Beneficios**

- **Graba, desensibiliza, imprime y adhiere** con una sola botella y un sistema de agente adhesivo autodecapado de una capa sin decapado aparte.
- **Los 3 rápidos pasos** (menos de 35 segundos) reduce el riesgo de contaminación.
- Ofrece una **adhesión hermética y prolongado** entre el compuesto fotopolimerizable y tanto el enamel como la dentina por una formulación altamente avanzada tanto en forma húmeda como seca.
- **La resistente y hermética adherencia** es ofrecida a través del monómero 4-MET para la dentina y a través del monómero estérico de ácido fosfórico para una adherencia superior y resistente al enamel.
- **Resistencia de adhesión consistente y a largo plazo** con el particular Nano-Filler.
- Provee un muy bajo riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- **La capa de adherencia con un espesor remarcablemente fino** inferior a 10<sup>m</sup> ofrece una superficie muy fría cubre más fácilmente la primera capa compuesta.


**Paquete**

**Paquete regular package**


- **ITEM #2001-2701**  
- Una botella de agente adhesivo(1 botella x 5ml)  
- 1 recipiente de mezclado  
- 50 broches desechables

**Paquete de recarga**

- **ITEM #2001-2702**  
- Una botella de agente adhesivo (1 botella x 5ml)

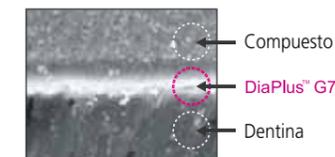


Capa delgada de adhesivo

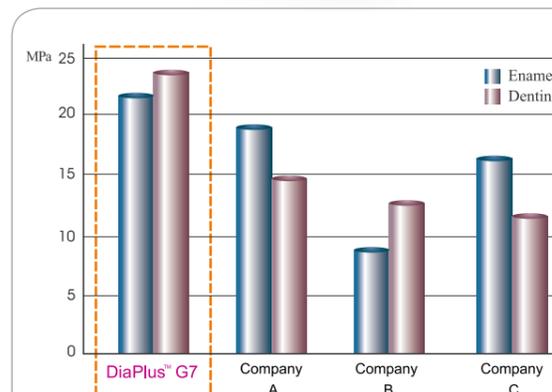

Resistencia superior de adhesion

**Una capa, aplicación simple y rápida de adhesivo**

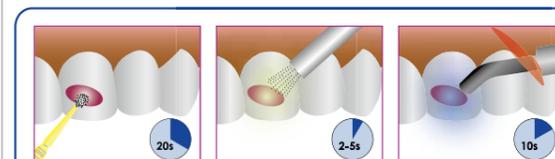

- 1 Se aplica el agente adhesivo y se frota durante 20 segundos.
- 2 Se seca con aire de alta presión durante 2-5 segundos.
- 3 Se fotopolimeriza durante 10 segundos.

**Menos de 35 segundos**

Guía técnica

**DIAETCH™ 37%**

**ACIDO FOSFORICO DE GEL DE DECAPADO 37%**

El ácido fosfórico es usado en el decapado del enamel y/o dentina

**Beneficios**

- Decapado del enamel y de la dentina con ácido fosfórico a un espesor ideal
- Aplicación rápida y efectiva en el lugar deseado
- Permite el enjuague completo y fácil de la superficie de los dientes
- Alta biocompatibilidad

**Paquetes**

**Paquete económico de tipo A**

- **ITEM #2001-3101** - 5 jeringas x 5ml y 20 puntas desechables

**Paquete económico de tipo B**

- **ITEM #2001-3102** - 5 jeringas x 3ml y 20 puntas desechables

**Paquete regular**

- **ITEM #2001-3103** - 2 jeringas x 3ml y 10 puntas desechables

**Paquete de recarga de tipo A**

- **ITEM #2001-3202** - 1 jeringas x 5ml y 5 puntas desechables



Before After  
(Microphotographs of premolar, X1,000)

**DIASEAL™**

**SELLANTE DE FOSA Y FISURA FOTOPOLIMERIZABLE**

Diseñado para el sellamiento de fosas y fisuras de los dientes para la prevención de las caries

**Beneficios**

- El monómero y el nano-relleno de serie UDMA ofrece una alta fluidez, una excelente resistencia y fuerza al desgaste
- Optima viscosidad para fluir fácilmente y ayuda a la fácil aplicación
- Asegura una transmisión higiénica y fácil y excelente versatilidad
- Verificación visual durante la aplicación

**Paquetes**

**Paquete regular**

- **ITEM #2001-5101**
- 2 jeringas de sellante x 1.2ml
- 2 jeringas de decapante x 1.2ml
- 10 puntas desechables de aguja para DiaSeal
- 10 puntas desechables de aguja para DiaEtch

**Paquete de carga**

- **ITEM #2001-5201**
- 1 jeringa de sellante x 1.2ml
- 5 puntas desechables de aguja

**Propiedades**

Valor promedio y desviación estándar del puntaje de micro-filtración

Materiales	Puntaje de micro-filtración (desviación estándar)
DiaSeal™	1.0000(1.1094)
U	1.7333(1.4829)
M	0.9167(1.2795)

Tratamiento de circuito térmico 500 veces, 1%  
Solución de metileno azul



**DIAFIL CORE™ AUTOMIX**

**COMPUESTO DUAL DE RECONSTRUCCION DE MUÑONES**

**NUEVO**

Materiales compuestos de dos componentes para doble polimerización(foto y autopolimerización) y radiopaco de reconstrucción de muñones en sistema de envío Automix

**Beneficios**

- Dispensador confortable: Las jeringas Automix envía una mezcla correcta y consistente en todos los usos
- Aplicación fácil y precisa con las puntas Automix e Intraoral
- Doble polimerización: Fotopolimerización durante 40 segundos o polimerización química durante 4 minutos
- Resina compuesta de alta resistencia a la compresión y durabilidad a largo plazo
- Cortes y desgastes al igual que la dentina
- Resistencia superior de superior con DiaPlus
- Disponible en 2 colores: Color natural (matiz A3) para los óptimos resultados estéticos y color azul

**Paquetes**

- **ITEM #2001-8101 Color Natural (matiz A3)**
- **ITEM #2001-8102 Color Azul**
- 2 jeringas de 9g
- 10 puntas Intraoral
- 10 puntas Automix
- **ITEM #2001-8109**
- 20 puntas Automix y 20 puntas Intraoral



**DIAFIL CORE™**

**COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE DE RECONSTRUCCION DE MUÑONES**

Los materiales compuestos de liberación de flúor autopolimerizable y a largo plazo consisten en dos componentes que son la base y catalizador para el sistema de reconstrucción de muñones.

**Beneficios**

- Provee buenas propiedades de manejo para un uso más fácil
- Ofrece un menor tiempo de preparación de autopolimerización
- Los materiales suaves y cremosos ayuda a llenar dentro de las puntas de las agujas muy fácilmente.
- Alto nivel de radiopacidad

**Paquetes**

- **ITEM #2001-7101**
- 10g de base + 10g de catalizador
- 15 espátulas
- 50 placas de mezcla
- 10 Puntas de aguja



## D-LUX

## LED DE POLIMERIZACION INALAMBRICA



D-Lux es un nuevo y avanzado LED de polimerización inalámbrica. Fabricado con el aluminio de altísima calidad, disipa rápidamente el calor para prevenir el problema de sobrecalentamiento por lo que puede producir la máxima intensidad de la luz en forma segura y consistente.

## Características


- **Panel OLED:** Control único y avanzado con un solo botón
- Una alta intensidad de **1,600mW/cm<sup>2</sup>** ofrece un tiempo de extremadamente corto de polimerización de no más de **5 segundos**
- Inalámbrico, altamente portable y liviano (sólo 155g)
- Diseño ergonómico único: provee un mango cómodo y un panel OLED de fácil lectura
- Durable one-piece aluminum design is robust and easy to disinfect
- High-performance lithium-ion battery technology:
  - Una nueva batería completamente cargada provee una polimerización de 160 x 10-segundos
  - El panel OLED indica convenientemente la duración de la batería y el timer de cuenta regresiva para la próxima carga necesaria.
  - La batería puede cargarse completamente en 90 minutos
- **5 versátiles modos de polimerización** para todas las indicaciones
- Fácil de cambiar el pack de batería

## Características del producto


Botón OLED  
de uso simple e intuitivo




Salida de alta  
intensidad

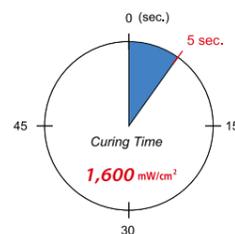


Sistema de carga  
rápida(90min)

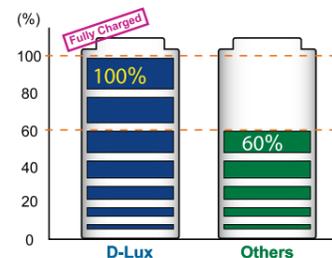


## 5 modos de polimerización

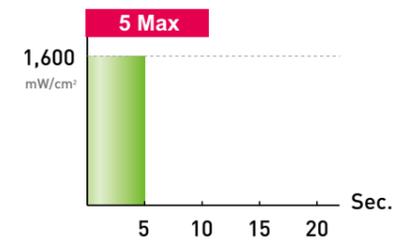**5 Max:**


Salida de luz de máxima intensidad durante 5 segundos

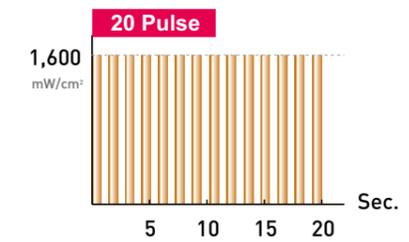**20 Pulse:**


Luz de máxima intensidad durante 20 segundos a pulsos cada 0.15 segundos

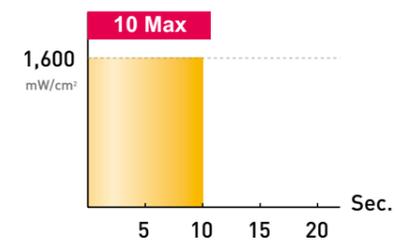**10 Max:**

Salida de luz de máxima intensidad durante 10 segundos

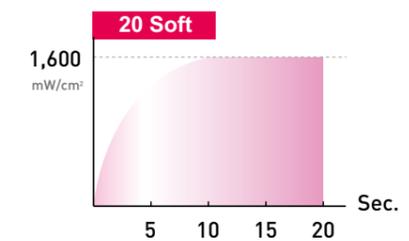**20 Soft:**

En el inicio, salida a 10% de la intensidad máxima que gradualmente se incrementa hasta la potencia completa en 10 segundos seguido de 10 segundos de salida a potencia completa

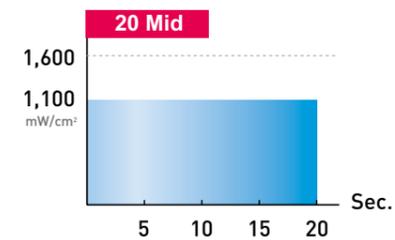**20 Mid:**

Salida de luz a 70% de máxima intensidad durante 20 segundos



## Paquetes

- **ITEM #4004-1001 Paquete regular**
  - Pieza de mano y cargador D-Lux
  - Accesorios: Guía de luz(11 x 11mm), protector plástico, fuente de potencia y cable

## Códigos de las partes del dispositivo

- **ITEM #4004-1110 Pieza de mano**
- **ITEM #4004-1120 Cargador**
- **ITEM #4004-1130 Guía de luz (11 x 11mm)**
- **ITEM #4004-1150 Pack de batería**
- **ITEM #4004-1160 Protector plástico**
- **ITEM #4004-1170 Fuente de potencia(adaptador)**
- **ITEM #4004-1171 Cable**

**DiaCem™ TempNE****CEMENTO TEMPORARIO SIN EUGENOL****NUEVO**

- Cemento temporario sin eugenol para restauraciones de cemento a prueba o coronas y puentes temporarios

**Características**

- Dosificación directa fácil y precisa
- No se necesita la mezcla manual con el uso de la punta Automix y es estable la viscosidad de la base y del catalizador
- Alta resistencia de adhesión para prevenir el derrame y alta sensibilidad al frío y al calor
- Fácil remoción para la confortabilidad de los pacientes
- Película delgada con alta resistencia a la compresión y a la flexión
- Rápido tiempo de trabajo (3 min) y de preparación (5 min en la boca)

**Paquetes**

- ITEM #2004-2101 2 jeringas de 10g, 10 puntas Automix
- ITEM #2001-6112 20 puntas Automix

**DIAPREP™ Plus****CREMA EDTA DE PREPARACION DEL CANAL RADICULAR**

Crema EDTA con peróxido de urea, usada como un agente para la preparación químico-mecánica del canal radicular.

**Características**

- Desbridamiento en el canal radicular
- Disolución de remanentes de la pulpa
- Remoción de la capa de barrillo dentinario
- Movimiento fácil de instrumentos del canal
- Tratamiento antibacterial entre en canal
- Lavado de los túbulos dentinarios y del área apical

**Beneficios**

- EDTA remueve la capa de barrillo, la dentina ablandada y facilita la remoción de la obstrucción de calcificación.
- El peróxido de urea reacciona con el hipoclorito de sodio para producir las burbujas de oxígeno que lava los restos dentro del canal.
- El medio lubricante facilita el movimiento del instrumento entre el canal para eliminar el liamiento o la rotura de los instrumentos.
- Los túbulos dentinarios y el área apical sin atascamiento permite una mejor penetración de los medicamentos y los rellenos al canal radicular.
- Provee rápida limpieza y ampliación de los canales a través del EDTA que ablanda las paredes y los restos del calcio.
- El mejor la inyección dentro de los canales que los líquidos.

**Paquetes**

- ITEM #2002-1100 – 2 jeringas de 6g, 10 puntas desechables y 1 tapa de protección
- ITEM #2001-6111 – 20 puntas desechables en una bolsa



# INSTRUMENTO DE ENDODONCIA

- Limas rotatorias de níquel-titanio
- Limas K-flexibles
- Léntulo
- Lima de sonda(Probe File)
- Fresa Gates(Gate Drills)
- Ensanchador Peeso(Peeso Reamers)
- Limas de mano de níquel-titanio
- Limas de mano de acero inoxidable
- Espaciador de acero inoxidable
- Condensadores de acero inoxidable
- Condensador de endodoncia
- Medidor de endodoncia
- Jeringas de irrigación
- Puntas de irrigación endodóntica

HELIX™

LIMAS ROTATORIAS DE NIQUEL-TITANIO





Beneficios

- Fabricado con aleación superior de níquel-titanio para el uso en el motor de funcionamiento.
- Especialmente diseñado para la técnica de crown-down.
- Ofrece una ampliación fácil y progresiva del canal.
- Las limas rotatorias Helix NiTi ayuda a formar canales curvados suavemente alrededor y hacer que sean cada vez más angostos.
- Las limas rotatorias Helix NiTi usa la identificación de color ISO y se suministran en longitudes de 21mm y 25mm.
- Con una increíble flexibilidad, se mueve fácilmente a través de los canales, especialmente aquellos severamente curvados.
- Alta resistencia a la fatiga cíclica y a la separación de la lima.
- Ofrece una excelente flexibilidad, capacidad de corte y reduce la fatiga del usuario.
- El mango ergonómico provee comodidad y excelente retroalimentación táctil.
- Velocidad recomendada: 150~350r/min

Forma de uso

- Coloque el K-File #10 lo más profundo posible o aproximadamente a 2/3 del canal de la corona. Esta lima está preferiblemente cubierta con DiaPrep Plus (EDTA gel).
- Prepare el pasaje con el K-File #15 K-file hasta el nivel previamente explorado por el K-File #10.
- Forme con las limas rotatorias #40 Helix NiTi (aro negro) del cono 0.06 (2 líneas) hasta 1/3 del coronal.
- Adicionalmente forme con las limas rotatorias #30 Helix NiTi (aro azul) del cono 0.06 hasta 2/3 del coronal.
- Explore con K-File #8 y #10 hasta la longitud de trabajo determinado con Apex Locator(NaviRoot Plus) y los rayos X.
- Prepare el pasaje con el K-File #15 hasta la longitud de trabajo.
- Forme con las limas rotatorias #20 Helix NiTi (aro amarillo) del cono 0.04 (1 línea) hasta la longitud de trabajo.
- Determine qué tamaño de forma apical se necesite.
- Forme con las limas rotatorias #20, #25 o #30 Helix NiTi del cono 0.04 o 0.06 hasta la forma apical final.
- Se recomienda una irrigación frecuente con la solución de hipoclorito de sodio y la lubricación DiaPrep Plus (EDTA Gel) durante el procedimiento.
- Coloque el tamaño apropiado de los conos de gutapercha de DiaDent(Dia-Pro Iso Plus).

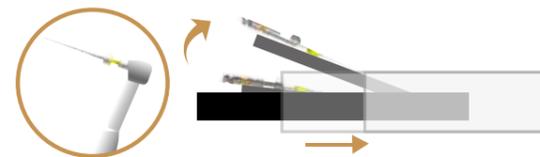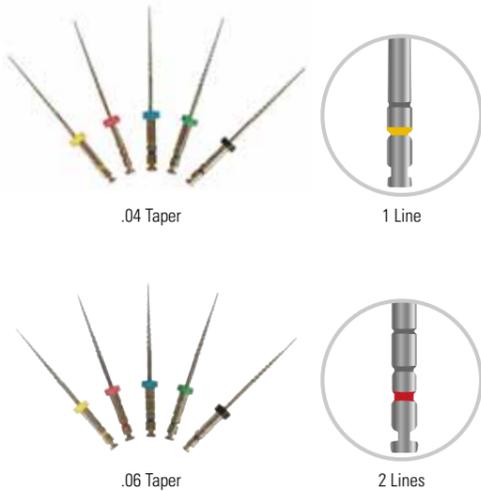

Size	21MM		25MM	
	.04	.06	.04	.06
#20	NT505-104	NT506-104	NT505-204	NT506-204
#25	NT505-105	NT506-105	NT505-205	NT506-205
#30	NT505-106	NT506-106	NT505-206	NT506-206
#35	NT505-107	NT506-107	NT505-207	NT506-207
#40	NT505-108	NT506-108	NT505-208	NT506-208
#20/35	NT505-193	NT506-193	NT505-293	NT506-293

(Pkg. of 6)


HELIX ORGANIZER



- ITEM #806-103 Rojo
- ITEM #806-104 Azul
- Ideal para la organización de las limas Helix
- Guarda hasta 10 limas Helix
- Removible para el lavado conveniente
- Dimensiones: 50 x 50 x 45mm(W x H x D)

DIA-FLEX FILE

LIMA FLEXIBLE

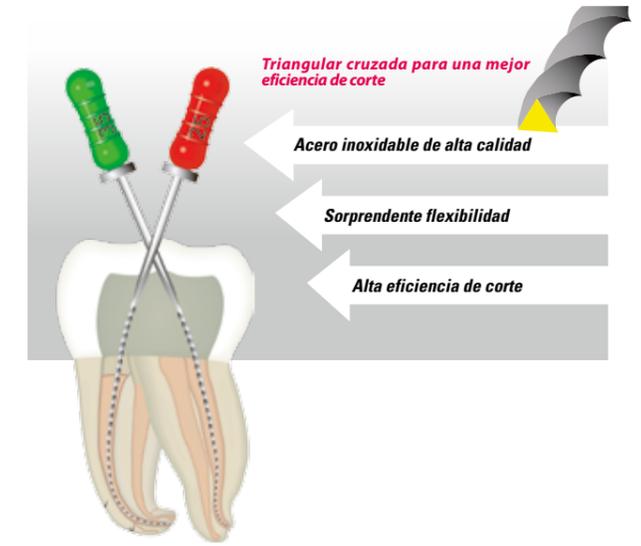

- Fabricado con el acero inoxidable de alta calidad para la creación de formas y aristas más resistentes a la fractura
- Posible de preparar completamente canales severamente curvados o angostos
- Ofrece mejor capacidad de corte y flexibilidad para forma cualquier canal radicular en forma fácil, segura y muy rápida
- Disponible en tamaños de 15 - 40 y longitudes de 21mm, 25mm y 31mm

Size	21MM	25MM	31MM
#15	505-103	505-203	505-303
#20	505-104	505-204	505-304
#25	505-105	505-205	505-305
#30	505-106	505-206	505-306
#35	505-107	505-207	505-307
#40	505-108	505-208	505-308
#15/40	505-191	505-291	505-391

(Pkg. of 6)

DIA-SPIRAL FILLER




- El relleno de pasta léntulo se usa para distribuir uniformemente el sellador y el cemento en el sistema del canal radicular
- La forma cónica está hecha por el alambre desgastado y el acero inoxidable de alto grado de forma espiral
- Es un poco rígido sin la espiral de seguridad
- Disponible en tamaños de 25 a 40 y en longitudes de 21mm y 25mm

Size	21MM	25MM
#25	507-105	507-205
#30	507-106	507-206
#35	507-107	507-207
#40	507-108	507-208
#25/40	507-191	507-291

(Pkg. of 4)

DIA-PROBE FILE

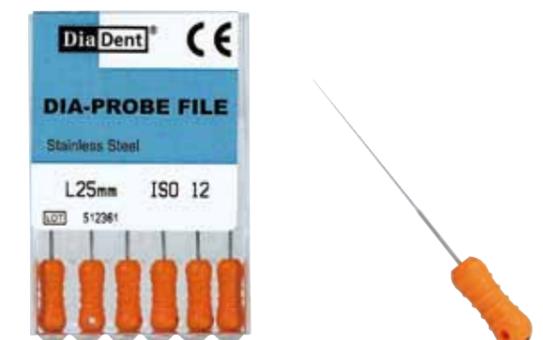

- Sonda de canal
- El cono mínimo ayuda a realizar los pasos intermedios en los canales calcificados o curvados
- Disponible en tamaño de #12 y en longitudes de 21mm y 25mm

Size	21MM	25MM
#12	506-101	506-201

(Pkg. of 6)

## GATE DRILLS

- Usado para la preparación de ahorro de tiempo de la parte superior y medio del canal no curvado o de la parte recta del canal curvado y crear efectivamente un excelente acceso para los ensanchadores y las limas.
- Amplía la porción coronal recta del canal con las fresas Gate y luego se ejecuta el paso de lima endodóptica usando primero el tamaño más grande tal como la técnica Crown Down.
- Acero inoxidable de calidad superior con mejorada capacidad de corte.
- El aro circular está codificado en el mango.
- Velocidad recomendada: 800~1200r/min

Size	28mm	32mm
#1	531-101	531-201
#2	531-102	531-202
#3	531-103	531-203
#4	531-104	531-204
#5	531-105	531-205
#6	531-106	531-206
#Asst1/6	531-191	531-291

(Pkg. of 6)



## PEESO REAMERS

- Usado para la preparación del 1/3 del coronal y sacar el material de relleno dentro del canal.
- Generalmente se usa para el pasaje posterior.
- Acero inoxidable de excelente calidad con un lado filoso para un rápido ensanchamiento.
- El aro circular está codificado en el mango.
- Velocidad recomendada: 800~1200r/min

Size	28mm	32mm
#1	541-101	541-201
#2	541-102	541-202
#3	541-103	541-203
#4	541-104	541-204
#5	541-105	541-205
#6	541-106	541-206
#Asst1/6	541-191	541-291

(Pkg. of 6)



## LIMAS DE MANO DE NIQUEL-TITANIO/PAQUETE DE PLASTICO

### Flexibilidad aumentada

: NiTi Shaft está hecha de níquel-titanio premium que es 5 veces más flexible que las limas de acero inoxidable.

### Resistencia:

NiTi es 10 veces más resistente al estrés comparada con las limas de acero inoxidable.

### Conveniencia:

Produce un ensanchamiento suave y progresivo del canal radicular.

NiTi sigue el pasaje existente del canal y lo memoriza por lo que no necesita doblar previamente las limas.

### Eficiencia:

Los mangos codificados con color y topes de silicona preinsertados.

### Seguridad:

NiTi resiste las roturas espontáneas.

La rotación angular incrementada reduce la fractura.

NiTi reduce la compresión y el vaciamiento.



### NITI REAMERS



NICKEL-TITANIUM REAMERS(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NT501-101	NT501-201
#10	NT501-102	NT501-202
#15	NT501-103	NT501-203
#20	NT501-104	NT501-204
#25	NT501-105	NT501-205
#30	NT501-106	NT501-206
#35	NT501-107	NT501-207
#40	NT501-108	NT501-208
#45	NT501-109	NT501-209
#50	NT501-110	NT501-210
#55	NT501-111	NT501-211
#60	NT501-112	NT501-212
#70	NT501-113	NT501-213
#80	NT501-114	NT501-214
#15/40	NT501-191	NT501-291
#45/80	NT501-192	NT501-292

(Pkg. of 6)



### NITI K-FILES



NICKEL-TITANIUM K-FILES(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NT502-101	NT502-201
#10	NT502-102	NT502-202
#15	NT502-103	NT502-203
#20	NT502-104	NT502-204
#25	NT502-105	NT502-205
#30	NT502-106	NT502-206
#35	NT502-107	NT502-207
#40	NT502-108	NT502-208
#45	NT502-109	NT502-209
#50	NT502-110	NT502-210
#55	NT502-111	NT502-211
#60	NT502-112	NT502-212
#70	NT502-113	NT502-213
#80	NT502-114	NT502-214
#15/40	NT502-191	NT502-291
#45/80	NT502-192	NT502-292

(Pkg. of 6)



### NITI H-FILES



NICKEL-TITANIUM H-FILES(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NT503-101	NT503-201
#10	NT503-102	NT503-202
#15	NT503-103	NT503-203
#20	NT503-104	NT503-204
#25	NT503-105	NT503-205
#30	NT503-106	NT503-206
#35	NT503-107	NT503-207
#40	NT503-108	NT503-208
#45	NT503-109	NT503-209
#50	NT503-110	NT503-210
#55	NT503-111	NT503-211
#60	NT503-112	NT503-212
#70	NT503-113	NT503-213
#80	NT503-114	NT503-214
#15/40	NT503-191	NT503-291
#45/80	NT503-192	NT503-292

(Pkg. of 6)

## LIMAS DE MANO DE NIQUEL-TITANIO/ PAQUETE DE AMPOLLA



- Paquete de ampolla para uso individual
- Flexibilidad incrementada
- Resistencia
- Conveniencia
- Eficiencia
- Seguridad

### NITI REAMERS



NICKEL-TITANIUM REAMERS(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NTB501-101	NTB501-201
#10	NTB501-102	NTB501-202
#15	NTB501-103	NTB501-203
#20	NTB501-104	NTB501-204
#25	NTB501-105	NTB501-205
#30	NTB501-106	NTB501-206
#35	NTB501-107	NTB501-207
#40	NTB501-108	NTB501-208
#45	NTB501-109	NTB501-209
#50	NTB501-110	NTB501-210
#55	NTB501-111	NTB501-211
#60	NTB501-112	NTB501-212
#70	NTB501-113	NTB501-213
#80	NTB501-114	NTB501-214
#15/40	NTB501-191	NTB501-291
#45/80	NTB501-192	NTB501-292

(Pkg. of 6)

### NITI K-FILES



NICKEL-TITANIUM K-FILES(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NTB502-101	NTB502-201
#10	NTB502-102	NTB502-202
#15	NTB502-103	NTB502-203
#20	NTB502-104	NTB502-204
#25	NTB502-105	NTB502-205
#30	NTB502-106	NTB502-206
#35	NTB502-107	NTB502-207
#40	NTB502-108	NTB502-208
#45	NTB502-109	NTB502-209
#50	NTB502-110	NTB502-210
#55	NTB502-111	NTB502-211
#60	NTB502-112	NTB502-212
#70	NTB502-113	NTB502-213
#80	NTB502-114	NTB502-214
#15/40	NTB502-191	NTB502-291
#45/80	NTB502-192	NTB502-292

(Pkg. of 6)

### NITI H-FILES



NICKEL-TITANIUM H-FILES(.02 TAPER)

size	21MM	25MM
#8	NTB503-101	NTB503-201
#10	NTB503-102	NTB503-202
#15	NTB503-103	NTB503-203
#20	NTB503-104	NTB503-204
#25	NTB503-105	NTB503-205
#30	NTB503-106	NTB503-206
#35	NTB503-107	NTB503-207
#40	NTB503-108	NTB503-208
#45	NTB503-109	NTB503-209
#50	NTB503-110	NTB503-210
#55	NTB503-111	NTB503-211
#60	NTB503-112	NTB503-212
#70	NTB503-113	NTB503-213
#80	NTB503-114	NTB503-214
#15/40	NTB503-191	NTB503-291
#45/80	NTB503-192	NTB503-292

(Pkg. of 6)

## ENDO STOP DISPENSER

### • ITEM #701-000

- Contiene 120 topos redondos surtidos
- Fácil de usar
- Tiene regla para la medición



## ENDO STOPS

### • ITEM#701-291

- Tipo direccional
- 120 topos de colores surtidos empaquetado en caja de plástico
- Estos topos endodóticos no pueden ser usados con el ENDO STOP DISPENSER



## LIMAS ENDODOTICOS DE MANO DE ACERO INOXIDABLE

- Instrumento de limpieza y formación del canal radicular
- Ofrece eficiencia de corte superior sobre en el manejo del proceso de inserción y retiro
- El mango ergonómico codificado con color provee confortabilidad y excelente retroalimentación táctil.
- Disponible en tamaños de 8 - 80 y en longitudes de 21mm, 25mm y 31mm



### REAMERS



- Hechos de alambre de acero inoxidable molido en forma triangular y retorcido

size	21MM	25MM	31MM
# 8	SS501-101	SS501-201	SS501-301
# 10	SS501-102	SS501-202	SS501-302
# 15	SS501-103	SS501-203	SS501-303
# 20	SS501-104	SS501-204	SS501-304
# 25	SS501-105	SS501-205	SS501-305
# 30	SS501-106	SS501-206	SS501-306
# 35	SS501-107	SS501-207	SS501-307
# 40	SS501-108	SS501-208	SS501-308
# 45	SS501-109	SS501-209	SS501-309
# 50	SS501-110	SS501-210	SS501-310
# 55	SS501-111	SS501-211	SS501-311
# 60	SS501-112	SS501-212	SS501-312
# 70	SS501-113	SS501-213	SS501-313
# 80	SS501-114	SS501-214	SS501-314
# 15/40	SS501-191	SS501-291	SS501-391
# 45/80	SS501-192	SS501-292	SS501-392

(Pkg. of 6)

### K-FILES



- Diseñado para limpiar y dar forma a los canales radiculares
- Producido para dar una suave sensación táctil a los operadores dentro del canal durante el manejo del instrumento

size	21MM	25MM	31MM
# 8	SS502-101	SS502-201	SS502-301
# 10	SS502-102	SS502-202	SS502-302
# 15	SS502-103	SS502-203	SS502-303
# 20	SS502-104	SS502-204	SS502-304
# 25	SS502-105	SS502-205	SS502-305
# 30	SS502-106	SS502-206	SS502-306
# 35	SS502-107	SS502-207	SS502-307
# 40	SS502-108	SS502-208	SS502-308
# 45	SS502-109	SS502-209	SS502-309
# 50	SS502-110	SS502-210	SS502-310
# 55	SS502-111	SS502-211	SS502-311
# 60	SS502-112	SS502-212	SS502-312
# 70	SS502-113	SS502-213	SS502-313
# 80	SS502-114	SS502-214	SS502-314
# 15/40	SS502-191	SS502-291	SS502-391
# 45/80	SS502-192	SS502-292	SS502-392

(Pkg. of 6)

### H-FILES



- Hecho con alambre de acero inoxidable
- La profundidad de la estría incrementa con el cono haciéndolo un instrumento más flexible

size	21MM	25MM	31MM
# 8	SS503-101	SS503-201	SS503-301
# 10	SS503-102	SS503-202	SS503-302
# 15	SS503-103	SS503-203	SS503-303
# 20	SS503-104	SS503-204	SS503-304
# 25	SS503-105	SS503-205	SS503-305
# 30	SS503-106	SS503-206	SS503-306
# 35	SS503-107	SS503-207	SS503-307
# 40	SS503-108	SS503-208	SS503-308
# 45	SS503-109	SS503-209	SS503-309
# 50	SS503-110	SS503-210	SS503-310
# 55	SS503-111	SS503-211	SS503-311
# 60	SS503-112	SS503-212	SS503-312
# 70	SS503-113	SS503-213	SS503-313
# 80	SS503-114	SS503-214	SS503-314
# 15/40	SS503-191	SS503-291	SS503-391
# 45/80	SS503-192	SS503-292	SS503-392

(Pkg. of 6)

## BARBED BROACHES



- Diseñado para remover el tejido de la pulpa
- Se coloca derecho dentro del canal radicular, se gira 180° y se lo saca



size	21MM	25MM
#20(XXXXF)	504-001	504-201
#25(XXXF)	504-002	504-202
#30(XXF)	504-003	504-203
#35(XF)	504-004	504-204
#40(F)	504-005	504-205
#25/40(XXXF/F)	504-092	504-292

(Pkg. of 6)

### SPREADER



- Usado para la condensación lateral del rellanamiento del canal radicular.
- Hecho de acero inoxidable.
- Alta resistencia al desgaste y excelente eficiencia de corte.
- 6 piezas en paquete de ampolla.

size	21MM	25MM
#15	520-103	520-203
#20	520-104	520-204
#25	520-105	520-205
#30	520-106	520-206
#35	520-107	520-207
#40	520-108	520-208
#15/40	520-191	520-291

### PLUGGER



- Usado para la condensación vertical del rellanamiento del canal radicular.
- Hecho de acero inoxidable.
- Alta resistencia al desgaste y excelente eficiencia de corte.
- 6 piezas en paquete de ampolla.

size	21MM	25MM
#15	521-103	521-203
#20	521-104	521-204
#25	521-105	521-205
#30	521-106	521-206
#35	521-107	521-207
#40	521-108	521-208
#15/40	521-191	521-291

### DIA-KONDENSOR

- Con un extremo de níquel-titanio y otro de acero inoxidable, puede ser usado en cualquier técnica de obturación endodóntica común incluyendo la condensación en caliente y en frío.
- Excelente durabilidad.
- Puede ser suministrado en 1 pieza o en un set con 4 tamaños.
- Uso conveniente con código en color en los condensadores.
- Diseño liviano y confortable.

size	ITEM No.
#35/70(Verde)	551-101
#40/80(Negro)	551-102
#50/100(Amarillo)	551-103
#60/120(Azul)	551-104
Set (4pcs)	551-191



### DIA-ENDORING

• ITEM #850-001

- Un aro conveniente para las limas de mano y las rotatorias.
- Medidor de 1 a 30mm.
- Diseño simple y práctico para la medición de limas.
- El aro cubierto de oro previene el cambio de color.
- Dimensiones: 45 x 25 x 15m/m(W x H x D)



### ENDO FINGERING

• ITEM #790-101

- Provee un control completo de todas las limas endodónticas.
- Las esponjas desechables fija las limas en una posición conveniente.
- Autoclavable excepto las copas
- Contenidos :
  - ITEM #790-111 : Copas desechables(48 piezas)
  - ITEM #790-121 : Esponjas desechables(48 piezas)
  - Aros de dedo (3 piezas)
  - Aros de copa (2 piezas)



### STERI ENDO GUARD W/RULER(ENGINE FILE)

• ITEM #716-203 Amarillo  
• ITEM #716-206 Azul

- Contiene 16 limas rotatorias NiTi.
- Uso con la mano derecha o izquierda.
- Disponible para insertar la esponja para limpiar o para fijar las limas.
- Diámetro: 75m/m, Altura: 35m/m



### FILE MEASURE SET(PLASTIC)

• ITEM #780-001

- Contiene 32 grados de medición.
- Mide de 12 a 27.5m/m, incluyendo las mediciones en mitad.
- Dimensiones: 87 x 31 x 20m/m (W x H x D)



### DIAFLEX™

### JERINGA DE IRRIGACION PARA CANAL RADICULAR



• ITEM #1003-301

- Jeringa de punta de polipropileno flexible y suave para la irrigación del canal radicular.
- Esterilizable en autoclave y en químico para uso múltiple de más de 50 veces.
- Volumen de 1.3ml impreso en intervalos de 1mm.
- Provee máximo efecto clínico en un mínimo tiempo.
- DiaFlex es compatible con Luer Lock Syringes.

DiaFlex - III


- Paquete de 3 jeringas codificadas con color, 20 puntas intercambiables y lubricante de silicona

DiaFlex - V

- Paquete de 5 jeringas codificadas con color, 20 puntas intercambiables y lubricante de silicona

• ITEM #1001-315

- 20 puntas desechables en un paquete de ampolla

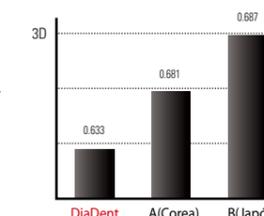

Especificaciones de la punta


### STERI. IRRIGATION TIPS- SIDE OPEN TYPE

- Puntas endodóticas y periodontales desechables con dispositivo de seguridad.
- Diseño único con un puerto lateral para mayor efectividad y confortabilidad del paciente en la irrigación de los canales radicales y en las bolsas periodontales.
- Pre-esterilizadas con gas E.O.
- Usar con Lure Lock Syringes.
- Puntas de irrigación de puerto lateral y extremo cerrado.



#### BOLSOS PERIODONTALES

- El diseño de puerto lateral permite una irrigación efectiva de los bolsos y la punta cerrada y redondeada puede reducir el riesgo de daño del tejido.

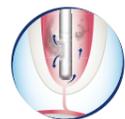

#### CANALES RADICULARES

- La dispersión del puerto lateral puede crear un movimiento de flujo hacia arriba para la preparación completa del canal radicular y limpiar completamente el surco gingival sin dañar el tejido.

size	Color	ITEM No.
31G (0.27 x 25mm)	Blanco limpio	951-101
30G (0.30 x 25mm)	Amarillo	951-102
28G (0.36 x 25mm)	Verde azul	951-103

(Pkg. of 50)



### IRRIGATION TIPS-END OPEN TYPE



- Puntas endodóticas y periodontales desechables
- Usar con Lure Lock Syringes.
- Irriga a fondo las preparaciones del canal radicular.
- La punta de extremo redondo puede prevenir el daño secundario durante el uso.
- Amplia selección de las puntas: 6 tamaños desde 18G hasta 27G.

size	Color	ITEM No.
18G (1.2 x 25mm)	Rosado	951-201
19G (1.1 x 25mm)	Crema	951-202
20G (0.9 x 25mm)	Amarillo	951-203
22G (0.7 x 25mm)	Negro	951-204
25G (0.5 x 25mm)	Anaranjado	951-205
27G (0.4 x 25mm)	Verde medio	951-206

(Pkg. of 100)



- Cajas de almacenamiento endodóntico de aluminio
- Antifaz y anteojos de protección
- Contenedores y bandejas de esterilización
- Cepillos profilácticos
- Copas profilácticas
- Bloques y portadores de fresa
- Bandejas de instrumento
- Arco de alambre de níquel-titanio
- Artículos de vidrio
- Cera dental

### SMALL ROUND TYPE A

- ITEM #803-003 Rojo
- ITEM #803-004 Azul



- Tiene 6 copas de silicona codificadas con color.
- Ideal para la organización de puntas de gutapercha y de papel.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 60m/m



### SMALL ROUND TYPE B

- ITEM #802-003 Rojo
- ITEM #802-004 Azul



- Ideal para la organización de limas de mano de mano.
- Contiene 20 instrumentos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 60m/m



### SMALL SQUARE TYPE A

- ITEM #807-003 Rojo
- ITEM #807-004 Azul



- Tiene 6 copas de silicona codificadas con color.
- Ideal para la organización de puntas de gutapercha y de papel.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 50 x 50 x 45m/m (W x H x D)



### SMALL SQUARE TYPE B

- ITEM #806-003 Rojo
- ITEM #806-004 Azul



- Ideal para la organización de limas de mano.
- Contiene 30 instrumentos endodócticos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 50 x 50 x 45m/m (W x H x D)



### MEDIUM OBLONG TYPE A

- ITEM #801-003 Rojo
- ITEM #801-004 Azul



- Un organizador versátil y práctico con un mango de limpieza para las limas de mano y rotatoria así como para las copas de gutapercha y de papel.
- Contiene 36 instrumentos, 3 copas de silicona y 1 mango de limpieza.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 50 x 50m/m (W x H x D)




### MEDIUM OBLONG TYPE B

- ITEM #809-003 Rojo
- ITEM #809-004 Azul



- Un organizador versátil y práctico con un mango de limpieza para las limas de mano y rotatoria así como para las copas de gutapercha y de papel.
- Contiene 60 instrumentos y 4 copas de silicona.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 50 x 50m/m(W x H x D)

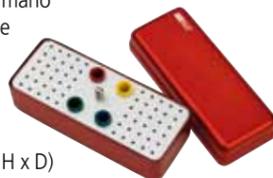

### MEDIUM ROUND

- ITEM #821-001 Plata



- Ideal para la organización de limas de mano y para las puntas de gutapercha y de papel.
- Contiene 64 instrumentos y 4 copas de siliconas con códigos de color.
- Pieza removible para la limpieza.
- Diámetro: 92m/m, Altura: 69m/m



### MEDIUM SQUARE

- ITEM #804-003 Rojo
- ITEM #804-004 Azul



- Un organizador versátil y práctico con un mango de limpieza para las limas de mano y rotatoria así como para las copas de gutapercha y de papel.
- Funciona como un medidor endodóctico para las limas y las puntas.
- Contiene 5 fresas, 30 instrumentos, 6 copas de silicona, 1 mango de limpieza, medidor endodóctico y 1 compartimiento para los instrumentos pequeños.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 120 x 50 x 80m/m(W x H x D)



### DIA-DELUXE

- ITEM #811-003 Rojo



- La mejor caja de DiaDent para organizar sus limas y puntas. Contiene 4 espaciadores/obturadores, instrumentos de 56(21mm) y de 48(25mm), 6 Gates Glidens, 10 Barbed Broaches, 28 copas y sección para algodón.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 215 x 50 x 100m/m (W x H x D)



### LARGE OBLONG TYPE A

- ITEM #812-004 Azul



- Un organizador simple y efectivo con secciones para sus limas de mano.
- Contiene 180 instrumentos endodócticos, 8 copas de silicona con código de color para las punta y caja inferior perforada.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 218 x 53 x 105m/m(W x H x D)



### LARGE OBLONG TYPE C

- ITEM #812-006



- Una caja muy práctica. Fácil para usar colocando individualmente según la necesidad.
- Contiene 206 instrumentos endodócticos y 12 copas de silicona para las puntas. Compartimientos intercambiables.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 x 53 x 105m/m (W x H x D)



### SMALL OBLONG-6 COMPT.

- ITEM #805-003 Rojo
- ITEM #805-004 Azul



- Ideal para contener fresas e instrumentos pequeños.
- Tiene 6 compartimientos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 15 x 50m/m (W x H x D)



### LARGE OBLONG TYPE B

- ITEM #812-005



- Un organizador para las limas de mano y rotatorias y para las puntas.
- Guarda sus instrumentos en un solo sitio.
- Contiene 357 instrumentos endodócticos y 21 copas de silicona para las puntas.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 x 53 x 105m/m(W x H x D)



### LARGE OBLONG TYPE D

- ITEM #812-007



- Organizador para limas de mano y rotatorias.
- Contiene 192 instrumentos endodócticos y 80 instrumentos rotatorios.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 x 53 x 105m/m (W x H x D)



### LARGE COMBI

- ITEM # 818-001



- Versátil y práctico. Permite la separación de instrumentos pequeños.
- Contiene 5 compartimientos individuales(A+B+C+D+E).
- Compartimiento A : 6 copas + 6 copas
- Compartimiento B : 2 set de 6 copas y contiene 12 instrumentos endodócticos
- Compartimiento C : 4 copas, Contiene 48 Instrumentos endodócticos
- Compartimiento D : 2 copas, Contiene 48 Instrumentos endodócticos
- Compartimiento E : Contiene 72 Instrumentos endodócticos
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 x 53 x 105m/m(W x H x D)




### MEDIUM COMBI

• ITEM #817-001



- Un organizador compacto y práctico de limas y puntas Compact & Practical File & Point Organizer.
- Contiene 3 compartimientos individuales (C+D+E).  
Compartimiento C : 4 copas, contiene 48 instrumentos endodónticos  
Compartimiento D : 2 copas, contiene 48 instrumentos endodónticos  
Compartimiento E : Contiene 72 instrumentos endodónticos
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 122 x 50 x 100m/m (W x H x D)

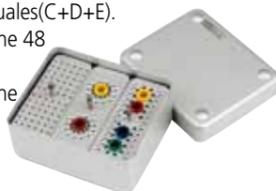

### SMALL COMBI TYPE A

• ITEM # 816-010



- Un organizador compacto para las puntas de gutapercha y de papel.
- Contiene 12 copas de silicona con código de color.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE H

• ITEM #816-080



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 48 Instrumentos endodónticos. Perforaciones de tamaño grande.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE I

• ITEM #816-090



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 48 Instrumentos endodónticos. Perforaciones de tamaño mediano y grande.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE B

• ITEM #816-020



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 24 instrumentos endodónticos, 12 copas de silicona con código de color para las puntas
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE C

• ITEM #816-030



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 48 instrumentos endodónticos, 4 copas de silicona con código de color para las puntas.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### ENDO GRIP(MINI)

• ITEM #833-001



- Comúnmente usado para limpiar las limas.
- Contiene esponja o gasa.
- Disponible en azul.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 35m/m



### ENDO CLEANER

• ITEM #834-001 Abierto  
• ITEM #834-002 Cerrado



- Comúnmente usado para limpiar y esterilizar las limas.
- Tapa en rosca para reemplazar fácilmente la gasa.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 30m/m



### SMALL COMBI TYPE D

• ITEM #816-040



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 48 instrumentos endodónticos, 2 copas de silicona con código de color para las puntas.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE E

• ITEM #816-050



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 72 instrumentos endodónticos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### ENDO METER SQUARE

• ITEM # 835-001



- Contiene y mide 32 limas u otros instrumentos endodónticos.
- Mide desde 15 hasta 30.5m/m, incluyendo las medidas en mitad.
- 2 copas para las limas y 1 sitio para los topes endodónticos.
- Dimensiones: 125 x 40 x 40m/m (W x H x D)



### LARGE OBLONG EMPTY BOX

• ITEM #820-003 Azul



- Un contenedor de almacenamiento para todos los propósitos.
- Ideal para el almacenamiento de accesorios.
- Dimensiones: 210 x 25 x 50m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE F

• ITEM #816-060



- Un organizador compacto para las puntas de gutapercha y de papel.
- Contiene 12 copas de silicona con código de color.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### SMALL COMBI TYPE G

• ITEM #816-070



- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 48 instrumentos endodónticos. Perforaciones de tamaño mediano.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 x 52 x 44m/m (W x H x D)



### ENDO METER

• ITEM #835-002 Type A Plata  
• ITEM #835-003 Type B Rojo



- Mantiene y mide 10 limas.
- Mide de 1 a 35mm.
- Tiene un mecanismo de cierre a resorte para un uso fácil.
- Diámetro: 35m/m, Altura: 48m/m



Type A



Type B

### DIA-100FS/DIA-100SS

- Antifaces y anteojos protectores de grado óptico para la cara y ojos contra los restos o sustancias volátiles.
- Liviano y muy confortable.
- Los antifaces pueden ser rápidamente posicionados y puestos sobre los anteojos
- Fácil de limpiar, lavable

#### Dia-100FS

- Antifaz de protección total de la cara
- 1 marco & 5 antifaces

1005-5010	DIA-100FS	PAQUETE DE RECARGA	5 ANTIFACES SOLAMENTE
1005-5011	DIA-100FS	PAQUETE REGULAR	CRISTAL
1005-5012	DIA-100FS	PAQUETE REGULAR	BLANCO
1005-5014	DIA-100FS	PAQUETE REGULAR	AZUL

#### DIA-100SS

- Anteojos de protección
- 1 marco & 5 antifaces

1005-5020	DIA-100SS	PAQUETE DE RECARGA	5 ANTIFACES SOLAMENTE
1005-5021	DIA-100SS	PAQUETE REGULAR	CRISTAL
1005-5022	DIA-100SS	PAQUETE REGULAR	BLANCO
1005-5024	DIA-100SS	PAQUETE REGULAR	AZUL



DIA-100FS



DIA-100SS

### DIA-300I

- **ITEM #1005-1041**
- Anteojos de protección. Protégé sus ojos contra los restos volátiles durante los procedimientos clínicos o de laboratorio.
- Lentes de alta calidad óptica con propiedades de resistencia química.
- Colocación confortable en el puente nasal y en los costados de la sien.
- Recubrimiento de las lentes (Lentes de PC, antivaho, anti UV, antiestática)

#### Características del producto



Ajustamiento vertical

Ajustamiento horizontal

Ultra liviano



- Antivaho
- Anti-UV
- Antiestática



Antivaho coating

### DIA-200B

- **ITEM #1005-1031**
- Gafas de protección multipropósito. Usadas por los dentistas y los cirujanos para la protección de los ojos de los restos volátiles. Previene los daños a los ojos y la contaminación de los polvos diminutos.
- Diseño de lentes esféricas para la óptica superior.
- Colocación confortable y liviana.
- Se colocan sobre los anteojos.
- Diseñado para la refrigeración y la ventilación.
- Tratamiento antivaho y antiestática.

#### Características del producto



Excelente amortiguación y ventilación

Buena circulación de aire

Fácilmente usado con los anteojos de corrección



- Antivaho
- Antiestática



Antivaho coating

### GERMICIDE TRAY

- **ITEM #711-001**

- Usado para la esterilización en frío.
- Fácil y seguro de manejar.
- Un compartimiento grande y un compartimiento pequeño.
- Fácil de cargar y descargar.
- Dimensiones: 263 x 72 x 115m/m (W x H x D)



### CONTAINER(STERILIZING)

- **ITEM #824-001 Type A**

- Contiene 10 instrumentos endodócticos.
- Dimensiones: 185 x 35 x 145m/m (W x H x D)



Type A

- **ITEM #824-002 Type B**

- Contiene 16 instrumentos endodócticos.
- Dimensiones: 185 x 35 x 286m/m (W x H x D)
- Contenedor de esterilización de buena y rígida construcción.
- Se caracteriza por su sistema de cerradura y por contener muchas unidades de esterilización.



Type B

### STERILIZING DRUM

- **ITEM # 828-002 Grande**

- Diámetro: 115m/m, Altura: 100m/m

Esteriliza con autoclave las fresas y pequeños instrumentos. Drenaje



Grande

### FLAT TRAY(STERILIZING) TYPE A

- **ITEM #827-001 Azul**

- Bandeja de esterilización.
- Ideal para instrumentos quirúrgicos.
- Aluminio anodizado.
- Dimensiones: 200 x 20 x 105m/m (W x H x D)



### GERMICIDE TRAY TYPE B

- **ITEM #711-106 Azul**

- Eficiente bandeja de esterilización de gran volumen diseñado para uso máximo de químicos para limpiar/desinfectar/esterilizar los instrumentos
- Dimensiones: 350 x 150 x 250m/m(W x H x D)



### CONTAINER(STORAGE)

- **ITEM #829-001 Type A**

- Dimensiones: 255 x 50 x 216m/m (W x H x D)



Type A

- **ITEM #829-002 Type B**

- Dimensiones: 255 x 50 x 108m/m (W x H x D)
- Caja multipropósito.
- Se usa como un organizador o para el almacenamiento.
- Los soportes de fresa se fijan bien en este contenedor.



Type B

### WASTE CONTAINER

- **ITEM #814-001 PEQUEÑO**

- Diámetro: 56m/m, Altura: 47m/m
- Color: Plata

Separa en 3 piezas para facilitar la limpieza. Equipado con el sistema de cerradura.



PEQUEÑO

### FLAT TRAY(STERILIZING) TYPE B

- **ITEM #827-002 Rojo**

- Bandeja de esterilización.
- Ideal para instrumentos quirúrgicos.
- Aluminio anodizado.
- Dimensiones: 180 x 10 x 100m/m (W x H x D)



### SCALING BRUSH LATCH TYPE

- **ITEM #941-001**
- Paquete de 72 cepillos.
- Estilo copa regular.
- Para el pulimiento de la superficie de los dientes después del raspado.
- Util para espacios amplios.
- Diámetro: 4.49mm



### SCALING POLISHING BRUSH LATCH TYPE

- **ITEM #941-103**
- Paquete de 36 cepillos.
- Estilo copa pequeña.
- Util para espacios angostos.
- Diámetro: 2.27mm



### SILICONE CUP FOR POLISHING LATCH TYPE

- **ITEM #941-002**
- Copas blandas y blancas
- Para el pulimiento de la superficie dental y mejoramiento rápido de brillo.
- Uso conveniente luego de insertar en ángulo contrario
- Paquete de 72 copas



### PROPHY RUBBER CUP RIBBED & WEBBED

- **ITEM #950-201** : Tipo Latch
- **ITEM #950-202** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas



Tipo Latch (RC - 001)



Tipo Tornillo (RC - 002)

### CANDLE BRUSH

- **ITEM #941-104** :
- Tipo Latch, paquete de 24 cepillos
- **ITEM #941-105** :
- Tipo tornillo, paquete de 24 cepillos y 10 mandriles
- Para la remoción de mancha de las fosas y fisuras oclusales y para la preparación de la superficie de los dientes antes del sellante y la aplicación ortodóntica
- Diámetro: Tipo Latch: 4.50mm / Tipo Tornillo 5.00mm



Candle Brush (Tipo Latch)



Candle Brush (Tipo Tornillo)

### POST BRUSH

- **ITEM #941-101** :
- Tipo Latch, paquete de 30 cepillos
- **ITEM #941-102** :
- Tipo Tornillo, paquete de 30 cepillos
- Para la rápida limpieza de la preparación del canal radicular debajo del puente.
- Disponible para colocar el líquido de esterilización durante el giro a la izquierda en ángulo contrario.
- Disponible para drenar las manchas como cemento, líquido durante el giro a la derecha.
- Rotación recomendable: 300-800rpm.
- Uso individual.
- Diámetro: Tipo Latch: 1.20mm / Tipo Tornillo 1.03mm



Post Brush (Tipo Latch)



Post Brush (Tipo Tornillo)

### PROPHY RUBBER CUP WEBBED

- **ITEM #950-211** : Tipo Latch
- **ITEM #950-212** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas



Tipo Latch (RC - 003)



Tipo Tornillo (RC - 004)

### PROPHY RUBBER CUP RIBBED

- **ITEM #950-221** : Tipo Latch
- **ITEM #950-222** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas



Tipo Latch (RC - 005)



Tipo Tornillo (RC - 006)

### PROPHY BRUSH

- **ITEM #950-101** : Tipo Latch
- **ITEM #950-102** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: Tipo Latch: 4.48mm / Tipo Tornillo 4.48mm



Tipo Latch (PB - 001)



Tipo Tornillo (PB - 002)



Tipo Latch (PB - 003)



Tipo Tornillo (PB - 004)

### PROPHY BRUSH POINTED HEAD

- **ITEM #950-111** : Tipo Latch
- **ITEM #950-112** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: Tipo Latch: 4.48mm / Tipo Tornillo 4.48mm

### PROPHY RUBBER CUP UMBRELLA SHAPE

- **ITEM #950-231** : Tipo Latch
- **ITEM #950-232** : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas



Tipo Latch (RC - 007)



Tipo Tornillo (RC - 008)

### PROPHY RUBBER CUP SNAP-ON

- **ITEM #950-251** : Con estrias
- **ITEM #950-252** : Con membranas
- Paquete de 144 copas



Con estrias (RC - 010)



Con membranas (RC - 011)

### PROPHY BRUSH LARGE HEAD LATCH TYPE

- **ITEM #950-121**
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: 5.98mm



(PB - 005)

### PROPHY BRUSH LARGE POINTED HEAD LATCH TYPE

- **ITEM #950-131**
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: 5.98mm



(PB - 006)

### PROPHY RUBBER CUP WEBBED WITH WASHER LATCH TYPE

- **ITEM #950-241**
- Paquete de 144 copas



(RC - 009)

### PROPHY RUBBER CUP SNAP-ON RIBBED & WEBBED

- **ITEM #950-253**
- Paquete de 144 copas



(RC - 012)

### STERI BUR BLOCK W/COVER

#### Tipo A

• ITEM #837-001

- Contiene 24 fresas de mango de fricción(alta velocidad).
- Tanto la cubierta plástica y el bloque de fresa son autoclavables.
- Dimensiones: 60 x 45 x 44m/m (W x H x D)



#### Tipo B

• ITEM #837-002

- Contiene 24 fresas de ángulo derecho(baja velocidad).
- Tanto la cubierta plástica y el bloque de fresa son autoclavables.
- Dimensiones: 60 x 45 x 44m/m (W x H x D)



#### Tipo C

• ITEM #837-003

- Contiene 12 Fresas de mango de fricción(alta velocidad)& 12 fresas de ángulo derecho(baja velocidad).
- Tanto la cubierta plástica y el bloque de fresa son autoclavables.
- Dimensiones: 60 x 45 x 44m/m (W x H x D)



#### Tipo D

• ITEM #837-004

- Contiene 36 fresas de mango de fricción(alta velocidad).
- Tanto la cubierta plástica y el bloque de fresa son autoclavables.
- Dimensiones: 60 x 45 x 50m/m (W x H x D)



#### Tipo E

• ITEM #837-005

- Contiene 36 fresas de ángulo derecho(baja velocidad).
- Tanto la cubierta plástica y el bloque de fresa son autoclavables.
- Dimensiones: 60 x 45 x 50m/m(W x H x D)



### MINI BUR STAND

#### Tipo A



- Plata ITEM #838-101
- Rojo ITEM #838-103
- Azul ITEM #838-104

- Contiene 12 fresas de mango de fricción(alta velocidad)
- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 x 32 x 25m/m (W x H x D)



#### Tipo B



- Plata ITEM #838-201
- Rojo ITEM #838-203
- Azul ITEM #838-204

- Contiene 12 fresas de ángulo derecho(baja velocidad)
- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 x 32 x 25m/m (W x H x D)



#### Tipo C



- Plata ITEM #838-301
- Rojo ITEM #838-303
- Azul ITEM #838-304

- Contiene 9 Fresas de mango de fricción(alta velocidad)& 3 fresas de ángulo derecho(baja velocidad)
- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 x 32 x 25m/m (W x H x D)



※ Todos los soportes de mini fresa pueden se suministrados con la marca privada en láser en cada soporte.

### GERMICIDE ROUND BUR BOX

• ITEM #915-001



- Contiene compartimiento perforado para el drenaje.
- Practica & durable.
- 1 bol de estanque/ 1 compartimiento perforado/1 cubierta.
- Diámetro: 75m/m, Altura: 35m/m



### DIVIDED TRAY(SIZE B)

- ITEM #715-403 Amarillo
- ITEM #715-406 Azul



- Bandejas de plástico polipropileno resistente, sin poros/mancha
- Disponible en forma dividida
- Dimensiones: 338 x 23 x 243m/m (W x H x D)



### INSTRUMENT TRAY TYPE A (Perforated)

• ITEM #826-001



- Contiene 10 instruments
- Ideal para la esterilización de instrumentos.
- Las perforaciones facilita la esterilización y el drenaje.
- Dimensiones: 190 x 35 x 150m/m (W x H x D)




### INSTRUMENT TRAY TYPE B (Perforated)

• ITEM #826-002



- Contiene 16 instruments
- Ideal para la esterilización de instrumentos.
- Las perforaciones facilita la esterilización y el drenaje.
- Dimensiones: 280 x 35 x 180m/m (W x H x D)

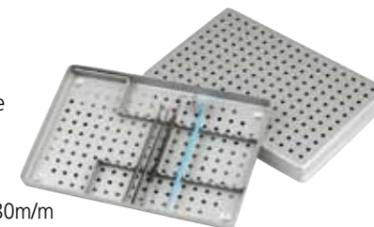

### COMPARTMENT BOX TYPE A

• ITEM #822-001



- Contiene 16 cuencos.
- Organizador de artículos pequeños.
- Dimensiones: 230 x 25 x 110m/m (W x H x D)



### STAINLESS STEEL TRAY TYPE A

• ITEM #914-001



- Una bandeja grande para todos los propósitos y almacenamiento.
- Dimensiones: 180 x 40 x 135m/m (W x H x D)



### INSTRUMENT TRAY TYPE A(Non-Perforated)

• ITEM #825-001



- Contiene 10 instrumentos
- Ideal para el almacenamiento de instrumentos.
- Dimensiones: 190 x 35 x 150m/m (W x H x D)



### INSTRUMENT TRAY TYPE B (Non-Perforated)

• ITEM #825-002



- Contiene 16 instrumentos
- Ideal para el almacenamiento de instrumentos.
- Dimensiones: 280 x 35 x 180m/m (W x H x D)



### COMPARTMENT BOX TYPE B

• ITEM #822-002





- Contiene 12 cuencos.
- Compartimientos en varios tamaños.
- Dimensiones: 230 x 25 x 110m/m (W x H x D)



## NICKEL TITANIUM ARCH WIRES

- Druan 5 veces más que los de acero inoxidable
- Rango de trabajo más amplio que los de acero inoxidable
- Menos distorsión y más memoria de forma que los de acero inoxidable
- Fácil de ordenar en la ranura del soporte

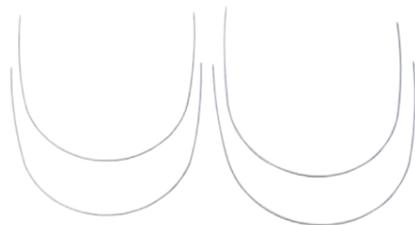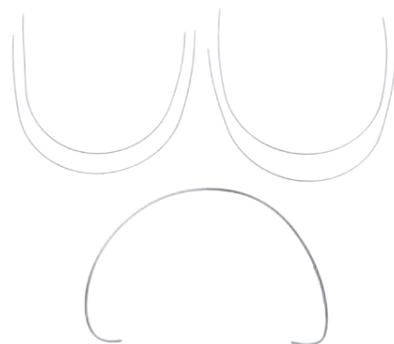

### SUPER ELASTIC ARCH WIRES

- Hecho con alambre de níquel-titanio de altísima calidad
- Tratamiento ultra suave altamente pulido
- Permite un alto grado de deflexión
- Se suministra en alambres redondos (para clase 1, caja blanda) y rectangulares (para un control más rígido y tridimensional).

#### Tipo redondo: Pkg. of 10

NT311-121	.012 Upper	SE-D-12-U
NT311-122	.012 Lower	SE-D-12-L
NT311-141	.014 Upper	SE-D-14-U
NT311-142	.014 Lower	SE-D-14-L
NT311-161	.016 Upper	SE-D-16-U
NT311-162	.016 Lower	SE-D-16-L
NT311-181	.018 Upper	SE-D-18-U
NT311-182	.018 Lower	SE-D-18-L
NT311-201	.020 Upper	SE-D-20-U
NT311-202	.020 Lower	SE-D-20-L

#### Tipo rectangular: Pkg. of 10

NT321-661	.016 x .016 Upper	SE-R-1616-U
NT321-662	.016 x .016 Lower	SE-R-1616-L
NT321-621	.016 x .022 Upper	SE-R-1622-U
NT321-622	.016 x .022 Lower	SE-R-1622-L
NT321-721	.017 x .022 Upper	SE-R-1722-U
NT321-722	.017 x .022 Lower	SE-R-1722-L
NT321-751	.017 x .025 Upper	SE-R-1725-U
NT321-752	.017 x .025 Lower	SE-R-1725-L
NT321-821	.018 x .022 Upper	SE-R-1822-U
NT321-822	.018 x .022 Lower	SE-R-1822-L
NT321-851	.018 x .025 Upper	SE-R-1825-U
NT321-852	.018 x .025 Lower	SE-R-1825-L
NT321-951	.019 x .025 Upper	SE-R-1925-U
NT321-952	.019 x .025 Lower	SE-R-1925-L
NT321-151	.021 x .025 Upper	SE-R-2125-U
NT321-152	.021 x .025 Lower	SE-R-2125-L

### REVERSE CURVE

#### Tipo redondo: Pkg. of 10

NT313-121	.012 Upper	RC-D-12-U
NT313-122	.012 Lower	RC-D-12-L
NT313-141	.014 Upper	RC-D-14-U
NT313-142	.014 Lower	RC-D-14-L
NT313-161	.016 Upper	RC-D-16-U
NT313-162	.016 Lower	RC-D-16-L
NT313-181	.018 Upper	RC-D-18-U
NT313-182	.018 Lower	RC-D-18-L
NT313-201	.020 Upper	RC-D-20-U
NT313-202	.020 Lower	RC-D-20-L

#### Tipo rectangular: Pkg. of 10

NT323-661	.016 x .016 Upper	RC-R-1616-U
NT323-662	.016 x .016 Lower	RC-R-1616-L
NT323-621	.016 x .022 Upper	RC-R-1622-U
NT323-622	.016 x .022 Lower	RC-R-1622-L
NT323-721	.017 x .022 Upper	RC-R-1722-U
NT323-722	.017 x .022 Lower	RC-R-1722-L
NT323-751	.017 x .025 Upper	RC-R-1725-U
NT323-752	.017 x .025 Lower	RC-R-1725-L
NT323-821	.018 x .022 Upper	RC-R-1822-U
NT323-822	.018 x .022 Lower	RC-R-1822-L
NT323-851	.018 x .025 Upper	RC-R-1825-U
NT323-852	.018 x .025 Lower	RC-R-1825-L
NT323-951	.019 x .025 Upper	RC-R-1925-U
NT323-952	.019 x .025 Lower	RC-R-1925-L
NT323-151	.021 x .025 Upper	RC-R-2125-U
NT323-152	.021 x .025 Lower	RC-R-2125-L

### SUPER ELASTIC OPEN SPRING

#### Pkg. of 2

NT331-010	.010	SE-S-10-O
NT331-012	.012	SE-S-12-O

### SUPER ELASTIC CLOSE SPRING

#### Pkg. of 10

NT332-010	.010	SE-S-10-C
NT332-012	.012	SE-S-12-C

### THERMAL ACTIVATED ARCH WIRES

- Mejora la fuerza de torque en la etapa temprana del tratamiento.
- Mejora la activación óptima a 37.5°C (temperatura de la boca) y luego se incrementa el nivel de fuerza.
- Fácil de manipulación

#### Tipo redondo: Pkg. of 10

NT312-121	.012 Upper	SM-D-12-U
NT312-122	.012 Lower	SM-D-12-L
NT312-141	.014 Upper	SM-D-14-U
NT312-142	.014 Lower	SM-D-14-L
NT312-161	.016 Upper	SM-D-16-U
NT312-162	.016 Lower	SM-D-16-L
NT312-181	.018 Upper	SM-D-18-U
NT312-182	.018 Lower	SM-D-18-L
NT312-201	.020 Upper	SM-D-20-U
NT312-202	.020 Lower	SM-D-20-L

#### Tipo rectangular: Pkg. of 10

NT322-661	.016 x .016 Upper	SM-R-1616-U
NT322-662	.016 x .016 Lower	SM-R-1616-L
NT322-621	.016 x .022 Upper	SM-R-1622-U
NT322-622	.016 x .022 Lower	SM-R-1622-L
NT322-721	.017 x .022 Upper	SM-R-1722-U
NT322-722	.017 x .022 Lower	SM-R-1722-L
NT322-751	.017 x .025 Upper	SM-R-1725-U
NT322-752	.017 x .025 Lower	SM-R-1725-L
NT322-821	.018 x .022 Upper	SM-R-1822-U
NT322-822	.018 x .022 Lower	SM-R-1822-L
NT322-851	.018 x .025 Upper	SM-R-1825-U
NT322-852	.018 x .025 Lower	SM-R-1825-L
NT322-951	.019 x .025 Upper	SM-R-1925-U
NT322-952	.019 x .025 Lower	SM-R-1925-L
NT322-151	.021 x .025 Upper	SM-R-2125-U
NT322-152	.021 x .025 Lower	SM-R-2125-L

## GLASS DAPPEN DISHES

- ITEM #601-001 Transparente
- ITEM #601-002 Ambar
- ITEM #601-003 Azul
- ITEM #601-004 Verde



- Plato Dappen estáandar.
- No deben ser esterilizados en autoclave.
- Fácil de limpiar.
- En venta individualmente o en caja de 12 piezas.

## MEDICAMENT BOTTLES

- TIPO REDONDO

- ITEM #604-001 Transparente
- ITEM #604-002 Ambar
- ITEM #604-003 Azul
- ITEM #604-004 Verde



- TIPO CUADRADO

- ITEM #605-001 Transparente
- ITEM #605-002 Ambar
- ITEM #605-003 Azul
- ITEM #605-004 Verde



- Tapas de cierre con buen capacidad de sellamiento.
- Disponible en 4 colores para la codificación de químicos.
- Fácil de usar y almacenar.
- Vidrio de alta calidad y de precio económico.
- Capacidad de 10ml
- No debe ser esterilizados en autoclave.

## MIXING SLAB

- ITEM #603-005 LT
- Dimensions : 150 x 15 x 80m/m (W x H x D)
- ITEM #603-004 LM
- Dimensions : 150 x 10 x 75m/m (W x H x D)
- ITEM #603-003 M
- Dimensions : 122 x 5 x 75m/m (W x H x D)
- ITEM #603-002 L
- Dimensions : 112 x 6 x 76m/m (W x H x D)
- ITEM #603-001 S
- Dimensions : 76 x 6 x 65m/m (W x H x D)
- Losas de mezclado de alta calidad y de precio competitivo disponibles en 5 tamaños.
- No debe ser esterilizados en autoclave.



## CHAIR SIDE TABLE

- ITEM #712-001 Blanco

- Tiene mecanismos de colocación.
- Puede ser adaptado a diversos tipos de sillas.
- Diámetro del hoyo: Disponible desde 25 hasta 50m/m.
- Fácil acceso a los instrumentos.
- Dimensiones: 390 x 30 x 235m/m(W x H x D)



## GLASS ENDO ORGANIZER

- ITEM #602-000



- Paredes delgadas de compartimientos para la esterilización en líquido.
- Plato de 6 pulgadas de diámetro con 12 compartimientos de paredes delgadas.
- Tapa de vidrio con depresiones para químicos.
- No debe ser esterilizados en autoclave.

## MEDICAMENT BOTTLE STAND

- ITEM #606-001

- Fija 5 botellas redondas o cuadradas de medicamento.
- Vidrio opaco de alta calidad.
- No debe ser esterilizados en autoclave.
- Color : Blanco lechoso
- Dimensiones: 215 x 27 x 55m/m(W x H x D)



## COTTON ROLL DISPENSER

- ITEM #770-001 Blanco

- Contiene aproximadamente 60 rollos de algodón.
- Cajón para abrir hacia afuera para un dispensamiento fácil del algodón.
- Tapa reversible para la recarga.
- Base antideslizamiento.
- Ancho ajustable para rollo de algodón de 20, 30 y 40m/m.
- Dimensiones: 170 x 101 x 52m/m (W x H x D)



## TISSUE HOLDER

- ITEM #712-101 Blanco

- Puede ser adaptado a diversos tipos de sillas.
- El porta caja de pañuelo de papel se ajusta a la barra del sillón del consultorio.
- Diámetro del hoyo: Disponible desde 25 hasta 50m/m.
- Dimensiones: 245 x 54 x 125m/m(W x H x D)



### STICKY WAX

- **ITEM # 940-010 Beige**
- Hecho de resina y cera de alta calidad.
- Usado para la unión temporaria en los trabajos de reparación de dentadura postiza.
- Fácil de ser raspado de la dentadura postiza después de hacer la caja yeso.
- 100g/caja



### UTILITY WAX

- **ITEM # 940-020 Blanco**
- **ITEM # 940-021 Rojo**
- Usado para construir un banco a lo largo de la bandeja.
- Tiene una flexibilidad superior
- Diámetro: 5m/m, Altura: 315m/m
- 250g/caja



### INLAY BLOCK WAX

- **ITEM # 940-030 Verde**
- Usado para el moldeado en línea.
- Baja congelación y contracción. La adecuada cohesión y nivel de solidez hace posible que produzca un patrón de cera más preciso.
- Dimensiones: 71 x 11 x 78m/m (W x H x D)
- 450g/caja



### MODELING WAX

- **ITEM # 940-040 Rosado**
- Usado para trabajos de dentadura postiza.
- Provee suficiente estabilidad para la placa base.
- La solidez se mantiene tanto en temperatura de la boca como en temperatura ambiental.
- Dimensiones: 170 x 1.4 x 100m/m (W x H x D)
- 500g/caja



### WAX SEPARATOR

- **ITEM # 940-050 Amarillo**
- Usado para la separación de la cera.
- Rápido secado y no se adhiere en la superficie de la dentadura postiza y puede ser fácilmente separado luego de un poco de encerado.
- 2 botellas de 60ml y 1 botella de 15ml
- Este artículo debe ser empaquetado como "Mercadería peligrosa" en el barco.



### DIE HARDENER

- **ITEM # 940-070 Azul**
- Hace que la superficie de la piedra pilar se endurezca para ser consolidado y cubierto y prevenir la abrasión.
- 2 botellas de 60ml y 1 botella de 15ml
- Este artículo debe ser empaquetado como "Mercadería peligrosa" en el barco.



### COLOR SPACER

- **ITEM #940-060 Plata**
- **ITEM #940-061 Oro**
- **ITEM #940-062 Rojo**
- Una ronda de aplicación genera un espacio de 12 and 13µm.
- Antes de usar, agitar la botella del espaciador de color.
- Si la solución se vuelve rígida, agregue unas gotas de diluyente.
- 1 botella de 60ml, 1 botella de 15ml and 1 botella(diluyente) de 60ml
- Este artículo debe ser empaquetado como "Mercadería peligrosa" en el barco.



Plata



Oro



Rojo

### X-RAY FILM HOLDER

- **ITEM #750-001**
- Usado para rayos X anteriores y posteriores.
- Angulado para la confortabilidad del paciente en los rayos X anteriores.



### RETRACTOR(TYPE A)

- **ITEM #740-001 Adulto**
- **ITEM #740-002 Niño**
- Plástico blando flexible
- Paquete de 2



### ID-RING

- **ITEM #942-101 Blanco**
- **ITEM #942-102 Negro**
- **ITEM #942-103 Marrón**
- **ITEM #942-104 Verde**
- **ITEM #942-105 Anaranjado**
- **ITEM #942-106 Rojo**
- **ITEM #942-107 Gris**
- **ITEM #942-108 Amarillo**
- **ITEM #942-109 Rosado**
- **ITEM #942-110 Marrón claro**
- **ITEM #942-191 Surtido**
- Goma de silicona
- Tamaño estándar(diámetro interno de 3.6mm)
- Paquete de 120



### CHEEK RETRACTOR(TYPE B)

- **ITEM #741-001 Adulto**
- **ITEM #741-002 Niño**
- Plástico blando flexible
- Expande la boca ampliamente
- Paquete de 2



### ENDO TRAINING BLOC

- **ITEM #943-100**
- Bloque de acrílico transparente.
- Ideal para bloque de entrenamiento para técnicas de obturación de gutapercha en caliente.
- Paquete de 10



### DOWEL PIN

- **ITEM #907-001: Pasador doble**
- **ITEM #907-002: Pasador single**
- Pasador doble con cartucho de acero y tapa de goma
- La tapa de goma ahorra el tiempo de trabajo.
- La tapa de goma facilita el trabajo.
- Fijación exacta y sin distorsión dentro de las preparaciones.
- Paquete de 1,000

